

SDI | ULTRAMAT S

WYSOKOOBROTOWY MIESZALNIK



PROSTY W UŻYCIU – TYLKO 3 PRZYCISKI

Mieszalnik posiada 3 przyciski służące do ustawiania czasu mieszania na 6, 8 lub 10 sekund, co umożliwia sprawną pracę wszystkimi materiałami w kapsułkach. W każdej chwili można przerwać pracę urządzenia naciskając dowolny z przycisków lub podnosząc pokrywę.

ŁATWY DO CZYSZCZENIA

Higieniczna powierzchnia pokrywy umożliwia dokładne czyszczenie i lepszą kontrolę infekcji, a gładkie plastikowe tworzywo, z którego wykonana jest obudowa mieszalnika, może być czyszczone wszystkimi środkami dezynfekującymi.

CICHA PRACA I NIEWIELKIE WIBRACJE

W przeciwieństwie do innych mieszalników, Ultramat S pracuje niezwykle cicho. Minimalne wibracje powodują, że urządzenie jest stabilne i nie przesuwa się podczas mieszania.

ODPOWIEDNI DLA WSZYSTKICH TYPÓW KAPSUŁEK

Elastyczne widetki pozwalają na umieszczenie w mieszalniku różnego rodzaju okrągłych kapsułek (amalgamaty) oraz kapsułek z wystającymi końcówkami do aplikacji materiału (glasjonometry).



FUNKCJE

SZYBKIE I DOKŁADNE MIESZANIE

Ultramat S jest wyposażony w generator drgań, sterowany mikroprocesorem, który kontroluje czas i pracę urządzenia oraz zapewnia dokładne i szybkie mieszanie.

WYSOKA WYDAJNOŚĆ

Przy częstotliwości 4550 wstrząsów na minutę [+/-1%] Ultramat S zapewnia dokładne mieszanie wszystkich materiałów w kapsułkach, przy jednoczesnym niskim zużyciu energii elektrycznej.

PRZEŁĄCZNIK NAPIĘCIA

Ultramat S działa prawidłowo przy napięciu prądu zasilającego 100-120V i 220-240V oraz częstotliwości 50 i 60Hz tak, by mógł być bez problemu stosowany w różnych krajach.

6, 8 & 10

SEKUNDY MIKROPROCESOR

4550

DRGAŃ

120 i 240 v

ZALETY

Dokładne i szybkie mieszanie

Cicha praca i niewielkie wibracje

Prosty w użyciu - tylko 3 przyciski

Właściwy dla wszystkich typów kapsulek

Bezpieczny

Łatwy do czyszczenia

Wskaźnik niskiego poboru mocy i automatyczny wyłącznik

2 lata gwarancji

Automatyczny wyłącznik

DANE TECHNICZNE

Szerokość	217mm	8.5"
Głębokość	173mm	6.75"
Wysokość	180mm	7.12"
Napięcie prądu	120 / 240 volt	50 / 60 Hz
Waga	2.43kg	5.4lbs

WSKAŹNIK POBORU MOCY I AUTOMATYCZNY WYŁĄCZNIK

Jeśli napięcie prądu nie będzie zgodne z wymaganymi 100-200V lub 220-240V, to wskaźnik zasilania będzie migać na niebiesko i nie będzie możliwe uruchomienie mieszalnika. Funkcja ta chroni urządzenie przed uszkodzeniem oraz nieprawidłowym mieszaniem kapsulek.

BEZPIECZEŃSTWO

Ultramat S przestanie pracować natychmiast po otwarciu przezroczystej pokrywy.

ODPOWIEDNI DLA WSZYSTKICH TYPÓW KAPSUŁEK


Ultramat S może być używany do mieszania wszystkich rodzajów materiałów dentystycznych w kapsułkach, zarówno produkowanych przez SDI jak i przez innych producentów.

Poniżej kilka przykładów wstrząsania materiałów w kapsułkach.

MATERIAŁ (KAPSUŁKI)	CZAS WSTRZĄSANIA (W SEKUNDACH) PRZY UŻYCIU ULTRAMAT S - USTAWIENIE PRĘDKOŚCI: STAŁA
Lojic+	6 ± 1
Permite rozmiar 1,2,3 / GS-80 rozmiar 1,2,3 / Ultracaps+ / Ultracaps S	8 + 1
Permite rozmiar 5 / GS-80 rozmiar 5	8 + 1
Riva Light Cure / Light Cure HV / Riva Self Cure (Regular and Fast) Riva Bond LC / Riva Protect / SeT / Riva Luting / Luting Plus /	10



KODY ZAMÓWIEŃ

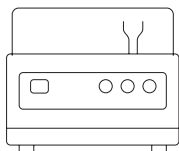

SPRZĘT

Ultramat S 5546058
(Wszystkie kraje - zawiera kabel zasilający właściwy dla kraju, do którego jest wysyłany)

Ultramat 2
(Wszystkie kraje - zawiera kabel zasilający właściwy dla kraju, do którego jest wysyłany)

*AutoMix, Dentomat Compact, OptiMix, ProMix, RotoMix, Silamat S5, Wig-L-Bug, nie są to zarejestrowane znaki towarowe firmy SDI Limited.



YOUR SMILE.
OUR VISION.



ACN 008 075 581



+DO36M5546591F

WYPRODUKOWANO W AUSTRALII
przez SDI Limited
Bayswater, Victoria 3153
Australia
www.sdi.com.au

AUSTRALII 1800 337 003
AUSTRIA 00800 0225 5734
BRAZYLIA 0800 770 1735
FRANCJA 00800 0225 5734
NIEMCY 0800 100 5759

WŁOCHY 00800 0225 5734
NOWA ZELANDIA +64 21 400 323
HISZPANIA 00800 0225 5734
WIELKA BRYTANIA 00800 0225 5734
USA & KANADA 1 800 228 5166