



# AURA BULK FILL

MATERIAL RESTAURADOR ULTRA UNIVERSAL



PREENCHER,  
ESCULPIR E  
PRONTO!




# A SIMPLICIDADE DA TÉCNICA DE PREENCHIMENTO

## RESTAURAÇÕES RÁPIDAS E SIMPLES EM DENTES POSTERIORES

- Cor universal - efeito camaleão, se adapta a cor do dente
- Polimerização profunda sem necessidade de camada de nivelamento
- Fácil aplicação, em questão de segundos
- Com consistência cerosa, compactável e não pegajosa para facilitar a manipulação

### PREENCHER, ESCULPIR E PRONTO!

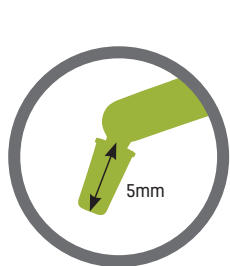


+



Incremento único  
de até 5 mm

**20seg**  
FOTOPOLIMERIZAÇÃO

**5mm**  
BULK FILL

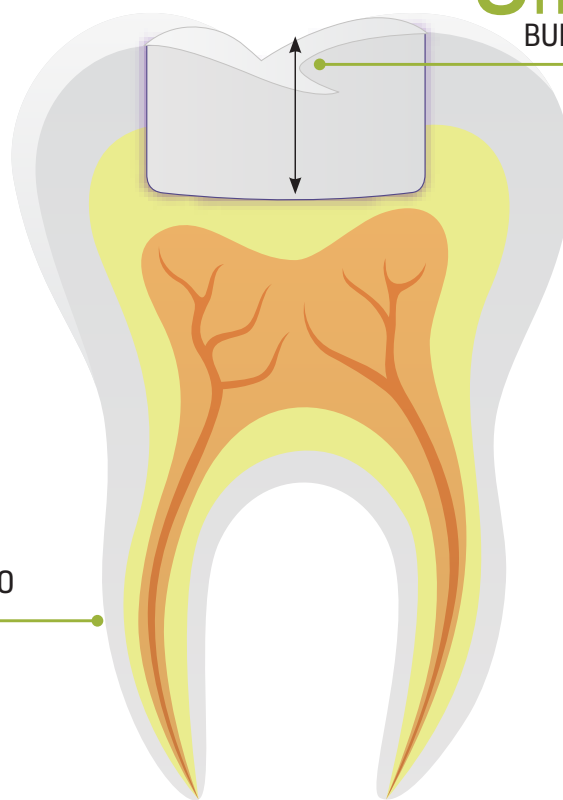

## ESTÉTICA COM SIMPLICIDADE E RAPIDEZ

### CASO CLINICO

PROF. ALEXANDER NISHIDA - USP



ANTES



DEPOIS

MACIEL JÚNIOR - UNESP



ANTES



DEPOIS

# UMA COR. UMA CAMADA.

## BAIXA CONTRAÇÃO VOLUMÉTRICA\*

O Aura Bulk Fill apresenta uma contração reduzida para proporcionar restaurações duradouras.

## EXCELENTE RESISTÊNCIA À FLEXÃO\*

O Aura Bulk Fill resiste às principais deformações sem fraturar.

## ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO\*

Aura Bulk Fill resiste às elevadas forças de compressão na cavidade oral.

2.21%

115MPa

375MPa

\*dados internos da SDI

## INDICAÇÕES

Restaurações posteriores em dentes permanentes e decíduos.

Construção de núcleo

Ferulização

Base de restaurações diretas




## PROFUNDIDADE DE POLIMERIZAÇÃO

A opacidade da aura bulk fill é resultado da diferença do índice refrativo dos seus dois componentes, a matriz e a resina.


O processo de polimerização altera ligeiramente o índice de refração da resina para corresponder ao índice de refração do preenchimento.

Isso reduz temporariamente a opacidade, permitindo uma penetração mais profunda para uma maior profundidade de polimerização.

Depois da polimerização, os índices mudam novamente para alcançar a opacidade ideal da aura bulk fill com seu acabamento de efeito camaleão brilhante.

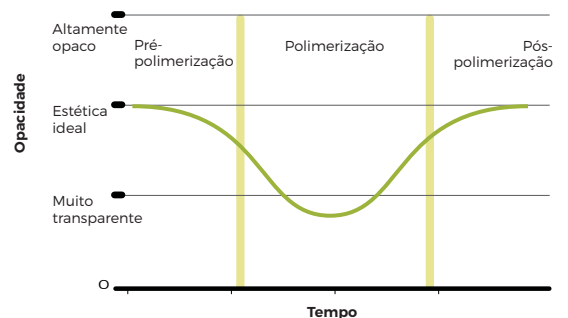

# CÓDIGOS PARA PEDIDOS

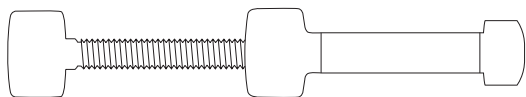

## SERINGA

Seringa Refil - 4g

8560012

» As restaurações com resinas compostas diretas são um desafio diário da nossa prática clínica. Não só pela complexidade da reconstrução, mas pelo tempo gasto com a técnica incremental. A agilidade e a diminuição da sensibilidade da técnica das restaurações com resinas bulk nos permite ganhar tempo e realizar várias restaurações altamente satisfatórias em menos consultas. A aura bulk fill veio para preencher uma lacuna do mercado e hoje se firma como uma das resinas Bulk que nós mais utilizamos. «

**PROF. ALEXANDER NISHIDA E PROF. CARLOS FRANCCI - USP**

## LINHA DE RESINAS AURA

Aura  
Aura Easy  
Aura Bulk Fill



SEU SORRISO.  
NOSSA VISÃO.



### SDI HOLDINGS PTY LTD DO BRASIL

Av. Doutor Reinaldo Schmithausen, 3141 Sala A  
Cordeiros Itajaí - SC  
Cep: 88.310-004  
Brasil  
DDG 0800 7701 735  
T +55 11 3092 7100 F +55 11 3092 7101



SDIOdonto



facebook.com/SDIBr



youtube/  
SDI Brasil



www.sdiodonto.com.br