

SDI | ULTRAMAT 2

VIBRATORE PER AMALGAMA AD ALTA VELOCITÀ



AMALGAMADOR DE ALTA VELOCIDADE MISTURADOR DE MÚLTIPLO

O Ultramat 2 possui dupla voltagem e o seu microprocessador digital de alta precisão controla o tempo, o que proporciona uma trituração consistente e acurada, assegurando ótimo manuseio e características clínicas de materiais misturados

MISTURADOR DE MÚLTIPLO USO

É adequado para todos os tipos de materiais dentais encapsulados.

CARACTERÍSTICAS DE SEGURANÇA

A trava de segurança automaticamente interrompe a trituração quando a tampa do Ultramat 2 é aberta

SIMPLES SISTEMA DE TOQUE DO CONTROLE

POUCA VIBRAÇÃO

DUPLA VOLTAGEM

PRÁTICO ÚNICA TAMPA FACILITA O HIGIENIZ



CARACTERÍSTICAS

TRITURAÇÃO CONSISTENTE E ACURADA

Timer constituído por microprocessador, controlado por temporizador a quartzo, podendo regular o tempo entre 0 e 6 segundos.

FREQUÊNCIA DA TRITURAÇÃO

Possui 4600 oscilações por minuto.

DUPLA VOLTAGEM

A característica da dupla voltagem do motor e do circuito é compatível com várias voltagens e frequências.

0-16

SEGUNDO
MICROPROCESSADOR

4600

OSCILAÇÕES

120 & 240v

ADVANTAGES

Trituração consistente e acurada

Garantia de 5 anos

0 e 6 segundosr timer

Pouca vibração


Para misturar mais encapsulado materiais dentários

Simples de ser usado

DIMENSÕES

largura	217mm	8.5"
profund	173mm	6.75"
altura	180mm	7.12"
Voltagem	120 / 240 volts	50 / 60 Hz
Peso	2.765kg	6.095lbs

GARANTIA DE 5 ANOS

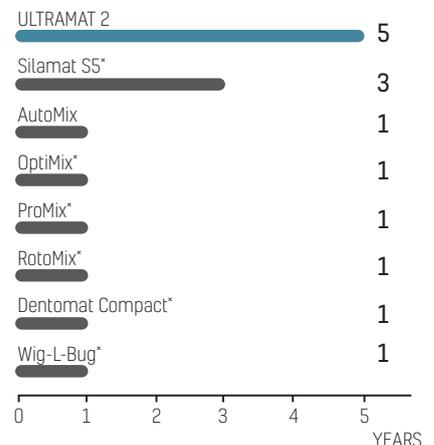

GARANTIA DE 5 ANOS


COMPATÍVEL COM TODAS AS CÁPSULAS

Apresenta garfo flexível que se encaixa em qualquer cápsula arredondada (cápsulas de amálgama), e também nas que contém êmbolos (como as cápsulas de cimento de ionômero de vidro).

DENTAL DEVICE (CAPSULES)	TRITUARATION TIMES (SECONDS) USING ULTRAMAT 2 - SPEED SETTING: FIXED
Lojic+	6 ± 1
1, 2, 3 spill Permite / 1, 2, 3 spill GS-80 / Ultracaps+ / Ultracaps S	8 + 1
5 spill Permite / 5 spill GS-80	6 + 1
Riva Light Cure / Light Cure HV / Riva Bond LC / Riva Protect / SeT / Riva Luting / Luting Plus / Riva Self Cure [Regular and Fast]	10



CÓDIGOS

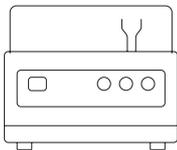

EQUIPMENT

Ultramat 2 (All countries - includes power cord for the region the product is shipped to)	5546052
Ultramat X (All countries - includes power cord for the region the product is shipped to)	5546070

*AutoMix, Dentomat Compact, OptiMix, ProMix, RotoMix, Silamat S5, Wig-L-Bug, are not registered trademarks of SDI Limited.



YOUR SMILE.
OUR VISION.



ACN 008 075 581



MADE IN AUSTRALIA
by SDI Limited
Bayswater, Victoria 3153
Australia
www.sdi.com.au

AUSTRALIA 1800 337 003
AUSTRIA 00800 0225 5734
BRAZIL 0800 770 1735
FRANCE 00800 0225 5734
GERMANY 0800 100 5759

ITALY 00800 0225 5734
NEW ZEALAND 0800 808 855
SPAIN 00800 0225 5734
UNITED KINGDOM 00800 0225 5734
USA & CANADA 1 800 228 5166