



AURA BULK FILL

MATERIAL RESTAURADOR ULTRA UNIVERSAL



FÁCIL,
RÁPIDO E
EFICAZ




A SIMPLICIDADE DO BULK FILLING

COMPÓSITO SIMPLES E RÁPIDO PARA RESTAURAÇÕES POSTERIORES.

- Acabamento natural com apenas uma tonalidade universal
- Fotopolimerização profunda sem necessidade de uma camada de nivelamento
- Colocação fácil em poucos segundos
- Consistência cerosa, compacta e não colante para otimizar o manuseamento

FÁCIL, RÁPIDO E EFICAZ

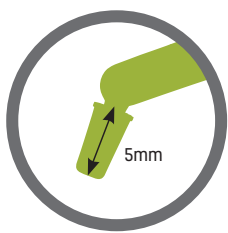

Preenchimento até 5 mm


+



20sec

FOTOPOLIMERIZAÇÃO LED

5mm
BULK FILL

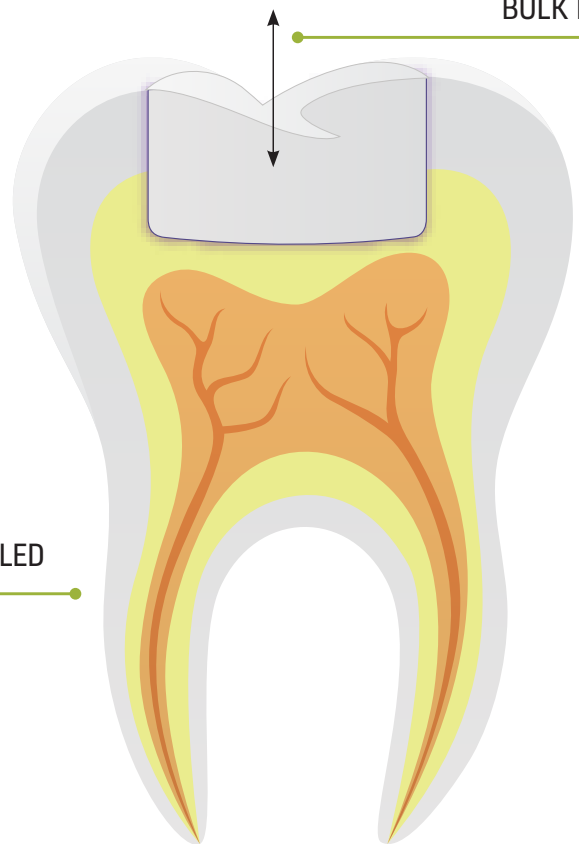

RESULTADO ESTÉTICO FÁCIL DE ALCANÇAR

ESTUDOS DE CASO

DR BOB LOWE [USA]




ANTES



DEPOIS

DR. GREGOR THOMAS [GERMANY]

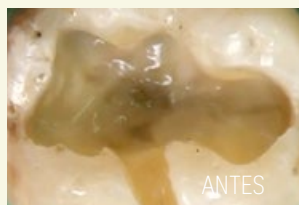

ANTES



DEPOIS

UMA COR. UMA CAMADA.

BAIXA CONTRAÇÃO VOLUMÉTRICA*

O Aura Bulk Fill apresenta uma contração reduzida para proporcionar restaurações duradouras.

EXCELENTE RESISTÊNCIA À FLEXÃO*

O Aura Bulk Fill resiste às principais deformações sem fracturar.

FORTE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO*

Aura Bulk Fill resiste às elevadas forças de compressão na boca.

2.21%

115MPa

375MPa

*SDI internal data

INDICAÇÕES

Restaurações posteriores

Construção de núcleo

Ferulização

Técnica de sanduíche com ionômero de vidro




PROFUNDIDADE DE POLIMERIZAÇÃO


A opacidade do aura bulk fill é proporcional ao seu índice de refração. Isto devido aos seus dois componentes: a matriz de resina e o conteúdo de carga.

O processo de polimerização altera ligeiramente o índice refractivo da resina para que este corresponda ao índice refractivo do conteúdo de carga.

Este processo permite a diminuição da opacidade temporária, permitindo a polimerização até ao limite mais profundo da camada de restauração.

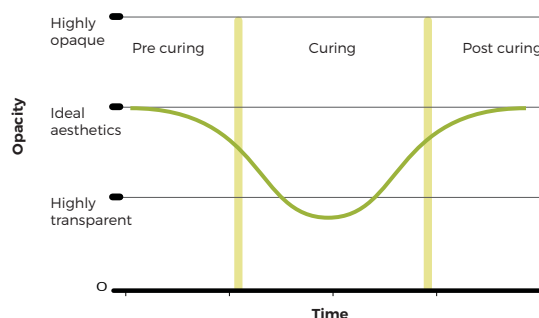


DETALHES DO PEDIDO

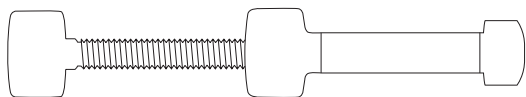

SYRINGES

Syringe Refill - 1 seringa x 4g de Bulk Fill

8560012

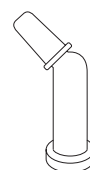

COMPLETS

Complet Refill - 20 cápsulas x 0.25g de Bulk Fill

8565012

» Tenho vindo a utilizar o aura bulk fill há três anos. O compósito sai suavemente da seringa ou da cápsula, não havendo contração. O polimento é incrível e as minhas restaurações posteriores nunca foram melhores. As características são ideais para qualquer restauração, seja em dentição primária ou definitiva. Tenho recomendado este produto a vários colegas e pretend continuar a utilizar o aura bulk fill como o meu principal compósito. «

DR LIEL GRINBAUM DMD

SÉRIE DE PRODUTOS AURA

Aura
Aura Easy
Aura Bulk Fill



SEU SORRISO.
NOSSA VISÃO.



MADE IN AUSTRALIA
por SDI Limited
Bayswater, Victoria 3153
Australia
www.sdi.com.au

AUSTRÁLIA 1800 337 003
ÁUSTRIA 00800 0225 5734
BRAZIL 0800 770 1735
FRANÇA 00800 0225 5734
ALEMANHA 0800 100 5759

ITÁLIA 00800 0225 5734
NOVA ZELÂNDIA 0800 808 855
ESPAÑA 00800 0225 5734
REINO UNIDO 00800 0225 5734
EUA e CANADÁ 1 800 228 5166