

SDI | LUNA 2

RESINA COMPOSTA UNIVERSAL

NÃO
CONTÉM
BPA

EXCELÊNTE
RESISTÊNCIA
E ESTÉTICA



» Gosto muito da Luna 2. É fácil de manusear e proporciona resultados estéticos de excelência! «


CELEBRAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 50 ANOS DA SDI

LUNA 2

A Luna 2 é a próxima geração de resina composta universal Luna. A Luna 2 tem uma mistura exclusiva e melhorada de resinas que foram estudadas e desenvolvidas na SDI, para proporcionar um melhor manuseio, radiopacidade muito elevada e propriedades mecânicas confiáveis. A Luna 2 não contém BPA, sendo ideal para pacientes que se preocupam com a saúde. A Luna 2 torna a colocação de uma resina mais fácil do que nunca.



Imagens cedidas pela Dra. Neus Sancho Lecina - Espanha

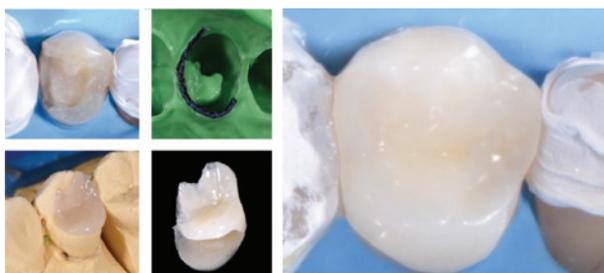

Onlay indireta com Luna 2. Imagens cedidas pelo Dr. Giuseppe Lacona - Itália



Imagens cedidas pelo Prof. Dr. Marco Aurélio Chaves da Silva - Brasil



Imagens cedidas pelo Dr. Michael Chan - Austrália



50 ANOS
MELHORANDO
A ODONTOLOGIA

» "Manuseio fantástico - enorme melhoria. É a resina da SDI mais fácil de manusear até agora." «

DR MICHAEL CHAN - AUSTRÁLIA



» "Para que um novo produto seja aceito e incorporado na prática da odontologia, este deve resolver um problema (como simplificar a seleção de cor) e ser fácil de usar. A LUNA 2 é uma vencedora em todos os aspectos!" «

DR FAY GOLDSTEP - CANADÁ



» "A LUNA 2 é uma resina extremamente versátil, com excelente viscosidade que garante um manuseio eficiente e sucesso na anatomia primária." «

PROFª DR LEONARDO UBALDO - BRASIL



» "Para mim, a LUNA 2 preenche todos os requisitos. É fácil de manusear, mistura-se uniformemente e tem um polimento brilhante." «

DR BILL GERGIS - AUSTRÁLIA



» "A LUNA 2 tem uma abordagem simplificada e estética, que é ótima para restaurações anteriores e posteriores." «

DR SAM KOH - AUSTRÁLIA



» "A LUNA 2 é, sem dúvida, o material que quero ter na minha rotina clínica e que recomendo aos meus alunos." «

PROF DRA. CRISTIANE DE MELO ALENCAR - BRASIL




» "A LUNA 2 é espetacular!" «

DR GIUSEPPE IACONA - ITÁLIA



CORRESPONDÊNCIA DE TONALIDADES MAIS RÁPIDA E PRECISA

A Luna 2 oferece a inovadora tecnologia Logical Shade Matching e o Chameleon Effect para uma seleção de tonalidades mais fácil e precisa. As tonalidades foram desenvolvidas dando prioridade ao valor (quantidade de branco), enquanto os pigmentos foram dispostos de forma logicamente crescente, para uma correspondência mais simples e rápida com o Vita Classical Shade Guide®. Os pacientes desfrutarão de resultados estéticos mais precisos, incluindo polimento e resistência ao desgaste para restaurações de longa duração.

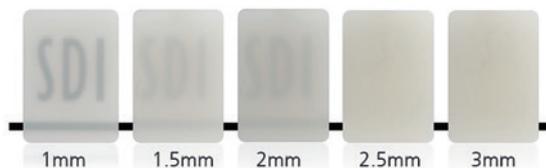

Translucidez em diferentes espessuras da tonalidade A2 da Luna 2



Escaneie o QR Code para baixar gratuitamente o Translucency Clinical Guide da Luna 2 e para acessar mais conteúdo relacionado com a Luna 2.



Imagens cedidas pelo Dr. Jiovane Neri e Dr. André Mattos - Brasil

» A Luna 2 tem ópticas lindas que imitam a estrutura do dente e permite colocar restaurações que desaparecem. Também tem um ótimo manuseio: não se agarra aos instrumentos e é fácil de esculpir. «

🇺🇸 DRA. SUSAN MCMAHON - ESTADOS UNIDOS



FORÇA DE COMPRESSÃO ELEVADA A 360 MPA

A maioria das forças mastigatórias são de natureza compressiva, tornando esta propriedade mecânica importante para restaurações posteriores, de forma a sustentar a carga oclusal sem fraturar.



ELEVADA RESISTÊNCIA À FLEXÃO 130 MPA

A Luna 2 resiste às forças mastigatórias de uma forma semelhante à dentina. Isto reduz o risco de falha em áreas de alto stress, como a Classe V, ou em áreas com menos apoio, como a substituição de cúspides ou caixas proximais.



PROPRIEDADES SEMELHANTES AOS DENTES NATURAIS EM QUALQUER LUZ

A tecnologia Luna 2 imita as propriedades ópticas naturais dos dentes em todas as fontes de luz. Os seus pacientes terão dentes translúcidos, com opalescência e fluorescência realistas, e um desempenho clínico excepcional.



MANUSEIO PERFEITO

O manuseio da Luna foi melhorado ainda mais. A Luna 2 tem um manuseio antiaderente e que mantém a forma esculpida. Os dentistas que realizaram testes clínicos com a Luna 2 elogiaram o seu excelente manuseio e a facilidade de preencher e esculpir.



RADIOPACIDADE 250% AL

Com a dentina/esmalte a uma radiopacidade de 100/170% Al, a radiopacidade excepcional da Luna 2 permite uma diferenciação clara, proporcionando uma visualização fácil e precisa para auxiliar no diagnóstico.



Fonte: dados de teste interno




NÃO CONTÉM BPA

A composição da Luna 2 não contém derivados de BPA, sendo ideal para pacientes que se preocupam com sua saúde.




POLIMENTO PERFEITO

A composição da restauração da Luna 2 foi aprimorada para obter excelentes resultados em termos de polimento, resistência ao desgaste e longevidade.

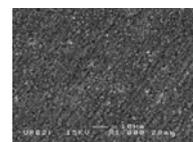

MVE (microscopia de varredura eletrônica) antes do acabamento e polimento



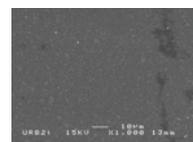


MVE depois do acabamento e polimento

FONTE: Testado de forma independente pela Unité de Recherches Biomateriaux Innovants et Interfaces (URB2I-EA 4462 Paris Descartes). Presidente: Dr. Jean-Pierre Attal

INSTRUÇÕES

- 1** Condicionamento seletivo ou total: Condicione a superfície do dente com ácido fosfórico a 37% Super Etch durante 10 segundos.
- 2** Enxágue cuidadosamente, remova o excesso de água e mantenha úmido.
- 3** Auto-condicionamento: Aplique o adesivo universal Zipbond (SDI Limited) de acordo com as instruções do fabricante, use um jato de ar cuidadosamente durante 5 segundos e fotopolimerize durante 10 segundos.
- 4** Aplique a Luna 2 em incrementos de 2mm ou menos. Fotopolimerize cada camada durante 40 segundos (tonalidades opacas) ou durante 20 segundos (outras tonalidades). Realize o acabamento e polimento com a Polishing Paste (SDI Limited).

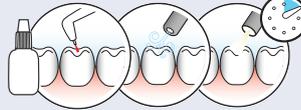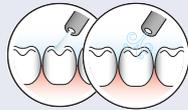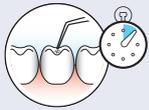

CÓDIGOS PARA PEDIDOS



KIT DE INTRODUÇÃO LUNA 2

Kit de Introdução Luna 2 com 5 seringas e adesivo universal Zipbond
5 Seringas de 4 g
[1 de cada - A1, A2, A3, A3.5, B1]
2 Seringas Gel Super Etch 2 ml
25 Pontas Descartáveis Super Etch
1 Zipbond Universal de 5 ml
40 Aplicador Points pontas finas (branco)
2 placas misturadoras - duplas



LUNA 2 SYRINGE 4G REFILLS

Luna 2 Syr A1 - Vita® A1	8452001
Luna 2 Syr A2 - Vita® A2	8452002
Luna 2 Syr A3 - Vita® A3	8452003
Luna 2 Syr A3.5 - Vita® A3.5	8452004
Luna 2 Syr B1 - Vita® B1	8452006
Luna 2 Syr B2 - Vita® B2	8452007
Luna 2 Syr C2 - Vita® C2	8452010
Luna 2 Syr Opaque OA2 - opaca com tonalidade A2	8452015
Luna 2 Syr Opaque OA3 - opaca com tonalidade A3	8452016
Luna 2 Syr I - Incisal: mais translúcida, equivalente ao esmalte	8452018
Luna 2 Syr XB - Tonalidade de clareamento extra equivalente à OM2 Vita®	8452021
Luna 2 Syr 2XB - 2X Tonalidade de clareamento extra: equivalente à OM1 Vita®	8452022



RECARGAS LUNA 2 COMPLET (20 RECARGAS DE 0.25 G; TOTAL DE 5 G)

Luna 2 Comp A1 - Vita® A1	8452051
Luna 2 Comp A2 - Vita® A2	8452052
Luna 2 Comp A3 - Vita® A3	8452053
Luna 2 Comp A3.5 - Vita® A3.5	8452054
Luna 2 Comp B1 - Vita® B1	8452056
Luna 2 Comp B2 - Vita® B2	8452057
Luna 2 Comp C2 - Vita® C2	8452060
Luna 2 Comp Opaque OA2 - opaca com tonalidade A2	8452065
Luna 2 Comp Opaque OA3 - opaca com tonalidade A3	8452066
Luna 2 Comp I - Incisal: mais translúcida, equivalente ao esmalte	8452068
Luna 2 Comp XB - Tonalidade de clareamento extra: equivalente à OM2 Vita®	8452071
Luna 2 Comp 2XB - 2X Clareamento extra tonalidade: equivalente à OM1 Vita®	8452072



Aplicador Económico Complet



Aplicador Premium Complet

APLICADORES

Aplicador Premium Complet	5545022
Aplicador Económico Complet	8100120

DICA CLÍNICA: As tonalidades XB e 2XB Bleach são ideais para utilizar em restaurações após um tratamento de clareamento dentário com Pola (SDI Limited), e também em dentes decíduos.



DICA CLÍNICA: A Luna 2 pode ser utilizada com Zipbond Universal (SDI Limited) - um adesivo universal monocomponente e liberador de flúor, com excelente manuseio e efeito dessensibilizante.



VEJA UMA RESTAURAÇÃO COM LUNA 2

Escaneie o QR Code abaixo



LUNA 2 TEMPO DE POLIMERIZAÇÃO

40 seg - tonalidades opacas
20 seg - tonalidades restantes



LUNA 2 PROFUNDIDADE DE POLIMERIZAÇÃO

2mm



YOUR SMILE. OUR VISION.



FABRICADO NA AUSTRÁLIA
por SDI Limited
Bayswater, Victoria 3153
Australia
www.sdi.com.au

AUSTRÁLIA 1800 337 003
ÁUSTRIA 00800 0225 5734
BRASIL 0800 770 1735
FRANÇA 00800 0225 5734
ALEMANHA 0800 100 5759

ITÁLIA 00800 0225 5734
NOVA ZELÂNDIA 0800 808 855
ESPAÑA 00800 0225 5734
REINO UNIDO 00800 0225 5734
EUA E CANADÁ 1 800 228 5166