

# ultramat S

HIGH SPEED AMALGAMATOR

HOCHFREQUENZ MISCHGERÄT  
AMALGAMADOR DE ALTA VELOCIDADE  
AMALGAMADOR DE ALTA VELOCIDAD  
VIBREUR ELECTRONIQUE A GRANDE VITESSE  
VIBRATORE PER AMALGAMA AD ALTA VELOCITÀ  
HIGH SPEED CAPSULESCHUDDER  
HØJHASTIGHEDS-KAPSELRYSTER  
HØYHASTIGHETS-KAPSELRYSTER  
NOPEA KAPSELISEKOITIN  
ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΔΟΝΗΤΗΣ ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ  
WYSOKOOBROTOWY MIESZALNIK  
NAGY SEBESSÉGŰ KAPSZULARÁZÓGÉP  
SUURE KIIRUSEGA AMALGAAMISEGISTI  
HITRI MEŠALEC AMALGAMA  
AUGSTAS FREKVENCES AMALGAMATORS  
DIDELIŲ APSUKŲ AMALGAMŲ MAIŠYTUVAS  
VYSOKO RÝCHLOSTNÝ AMALGAMÁTOR  
HITRI MEŠALEC AMALGAMA  
高速アマルガムミキサー  
高速銀汞調拌机



S 表示简单!

# ultramat S



## 高速银汞调拌机


- 准确均匀调拌
- 低震动和超静
- 使用简单 - 仅3个按键
- 适用您所有胶囊
- 容易清洁
- 电源不足显示灯和关机功能
- 双电压



# ultrammat S 功能特点


## 高速银汞搅拌机

有3个时间设置选择, 6, 8, 10 秒来混合您所有胶囊装材料。该机可以随时在操作过程中按这些键来停机, 也可以提起安全盖停机。

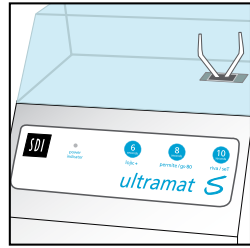

## 如此容易清洁!

卫生清洁表面盖有利传染控制, 可用任何口腔消毒剂清洁无孔塑料表面。

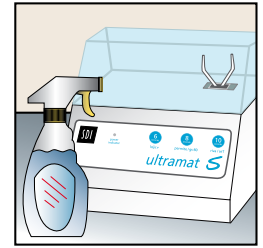


## 准确和均匀搅拌

Ultramat S 设有微处理器控制震荡时间来准确和均匀搅拌。




## 双电压

Ultramat S 可以在 100-120V 和 220-240V, 50 和 60Hz 下工作, 与多种电压和频率的电源相容。

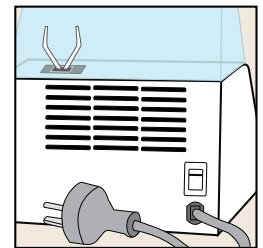


## 低震动和超静

不像其他一些银汞机, Ultramat S 只输出很低的噪音。所有内部件最小震动确保它不会离开固定位置。

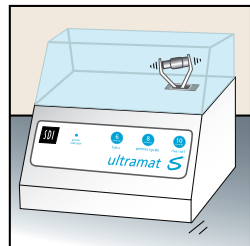


## 电源不足显示灯和关机功能

电源供应不在要求的 100-120V 和 220-240V 范围内时, 电源指示灯闪烁蓝光, 机器停止工作直到电源供应正常。这防止材料调拌混合不充分。

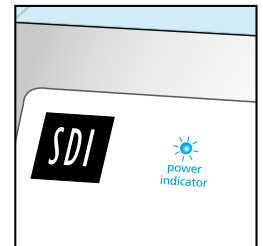



## 适用您所有胶囊

可弯曲的叉可以固定多种圆底胶囊(银汞胶囊), 也可固定那些带突出嘴的胶囊(玻璃离子水门汀胶囊)。

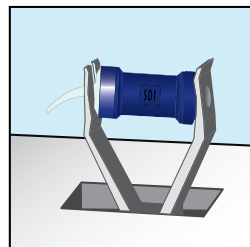


## 安全特性

Ultramat S 当透明盖打开时, 机器立即停止调拌。

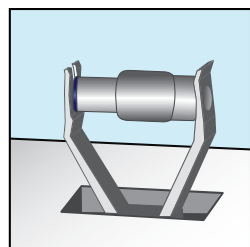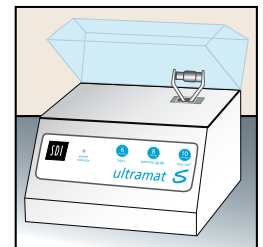

## 高效输出和低耗能

拥有振荡频率高达每分钟 4550 次 (+/-1%), Ultramat S 确保完全混合任何牙科材料, 而且消耗相当低的能源。

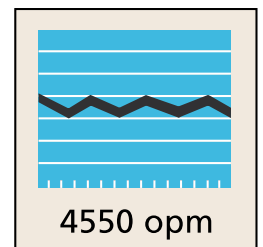

# ultramats



## 尺寸

width	depth	height
217mm	173mm	180mm
8 1/2"	6 3/4"	7 1/8"

## 电压

100 - 120 volts

220 - 240 volts

50 - 60 Hz

## 重量

2.43kg

5.4lbs

## Ultramat S

(所有国家 - 包括运去当地的电源线)  
订货编号 5546058



由澳大利亚SDI Limited  
(南方牙科工业有限公司)制造  
总部地址: Bayswater, Victoria 3153  
澳大利亚: 1 800 337 003  
奥地利: 00800 022 55734  
巴西: 0800 770 1735  
法国: 00800 022 55 734  
德国: 0800 100 5759  
爱尔兰: 01 886 9577  
意大利: 800 780625  
新西兰: 0800 734 034  
西班牙: 00800 022 55 734  
英国: 00800 022 55 734  
美国与加拿大: 1 800 228 5166  
[www.sdi.com.au](http://www.sdi.com.au)