


# přirozený, jednoduchý a krásný **ÚSMĚV**

logický inovativní výplňový systém,  
který za všech okolností šetří čas




Your Smile. Our Vision.

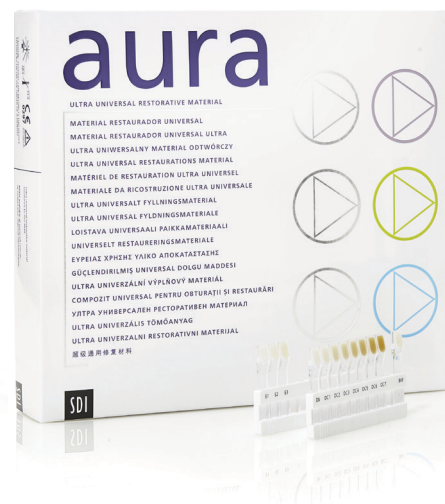

## Minimální smršťování objemu zaručuje maximální tvarovou stálost.

- Aura představuje spojení nové kompozitní pryskyřice s nízkým smršťováním a nového plniva s vysokou hustotou (UHD).


### MINIMÁLNÍ SMRŠTOVÁNÍ (%)<sup>2</sup>

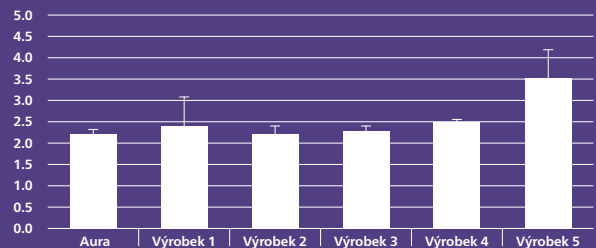

## Výborné hodnocení pevnosti v ohybu u výrobků Aura

- Díky nadprůměrné pevnosti v ohybu odolají výrobky Aura silám přenášeným uvnitř úst.


### PEVNOST V OHYBU (MPa)<sup>2</sup>

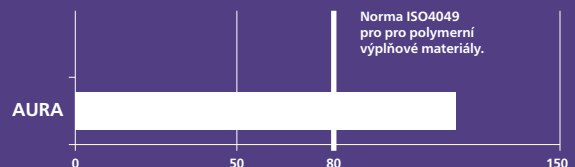

## Aura má vysokou pevnost v tlaku

- Jedinečná morfologie plniv UHD poskytuje neobyčejně silnou styčnou plochu, která odolá velkým tlakovým silám.

### PEVNOST V TLAKU (MPa)<sup>2</sup>

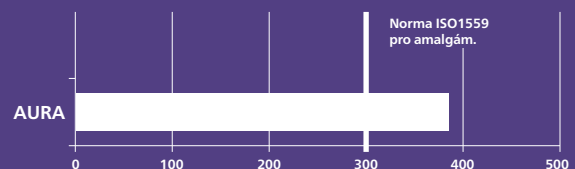


## Rozsáhlé výplně

- Pro rychlé posteriorní výplně, kdy není nutné překrývat sklovinou.
- Určeno pro dosažení velké hloubky vytvrzení a vysoké pevnosti.

## Víceúčelové využití

- Dostupné také ve 4 víceúčelových odstínech chroma MC2, MC3, MC4 a MC5. Ty jsou ideální pro estetické a rozsáhlé výplně.

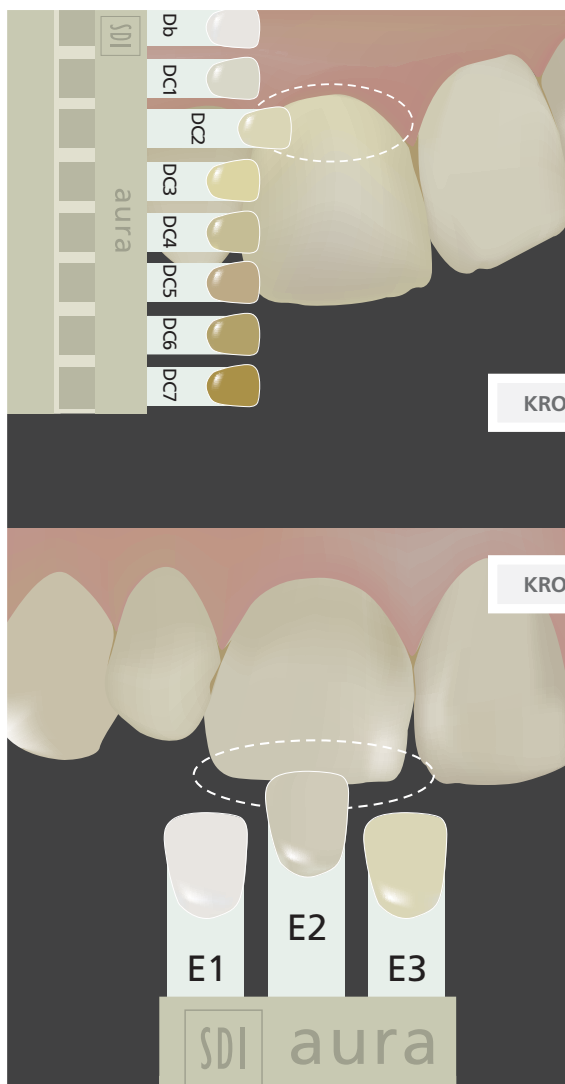

KROK 1

KROK 2

## Aura - snadný způsob stanovení a párování barvy zubu.

Vzhledem k tomu, že celkovou barvu zubu určuje dentin, nikoli sklovina, hlavní prioritou by měl být výběr správného odstínu dentinu.

Zvolte odstín dentinu podle místa, kde je dentin odhalený nebo kde je cervikální část zubu nejtenčí.

Zvolte odstín skloviny podle incizní hrany sousedního zubu vedle zubu, do kterého budete vkládat výplň.

## Aura - snadný systém pro dokonalý lesk.

Sklovina Aura obsahuje mikročástice, které umožňují snadnou leštitelnost a zaručují dokonalý lesk. Zrcadlově lesklý povrch zůstává zachován na dlouho.

Zvolte odstín skloviny podle typu pacienta:

- E1 Mladý nebo bělený chrup
- E2 Dospělý chrup
- E3 Starý chrup




## Jak složení zubu ovlivňuje jeho barvu.

- Barvu zubu určuje dentin, nikoli sklovina. Proto při stanovení celkové barvy zubu hraje hlavní roli dentin.
- Sklovina je relativně průsvitná, vyžaduje však vysokou leštitelnost.

### Dentin určuje 95 % barvy celého zubu<sup>1</sup>

- Jednotná opacita
- Nasycení odstínu
- Fluorescence

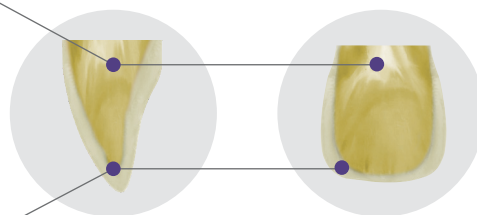

### Sklovina určuje 5 % barvy zubu<sup>1</sup>

- Translucence
- Nevýrazná barva
- Opalescence


## Aura - lineární stupnice zaručuje snadný výběr barvy zubu.

Aura je výsledkem pětileté spolupráce s odborníky na zubní výplně a materiály z celého světa.


- Téměř všechny dentiny mají podobný "odstín", který spadá do červeno-hnědo-žluté škály.
- Aura se zaměřuje na aspekt, kterým se barva jednotlivých zubů liší, tzv. chroma.
- Chroma určuje, jak silná nebo slabá konkrétní barva (odstín) je, a tuto hodnotu vyjadřuje v % sytosti.

Toto přímočaré a vědecké uspořádání umožňuje předvídatelnost a jednoduchost při individuální úpravě odstínů.

### SPOLEHLIVÉ A ŠIROKÉ CHROMA VÝROBKŮ AURA ZARUČUJE PŘEDVÍTELNOST

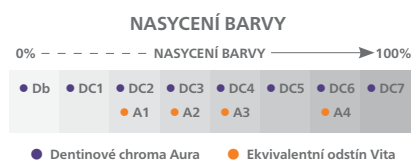



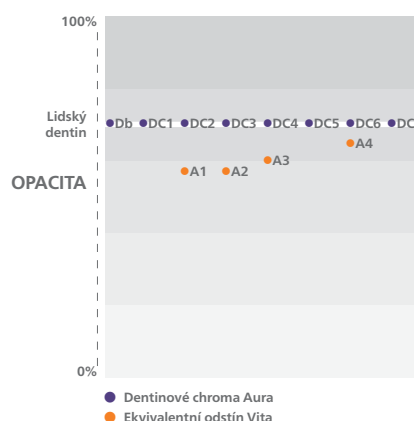







### AURA NABÍZÍ ŘEŠENÍ S JEDNOTNOU OPACITOU



# Aura, novinka z Austrálie.

- Přirozené složení a barva skloviny a dentinu.
- Jednoduchá technika vrstvení, která reprodukuje přirozenou barvu zubů.
- Vysoká leštitelnost a tvarovatelnost.
- Navržena tak, aby vytíženým stomatologům usnadnila párování odstínů.



KAT. ČÍSLO	MNOŽSTVÍ	STŘÍKAČKY	KAT. ČÍSLO	MNOŽSTVÍ	KOMPULE
 8565100		<b>Úvodní sada Aura Master Introductory Kit – stříkačky</b> 8 4g stříkačka (Db, DC1, DC2, DC3, DC4, DC5, DC6, DC7) 3 3g stříkačka (E1, E2, E3) 1 4g stříkačka (bulk-fill kompozitum) 2 VZORNÍK BAREV AURA MASTER	 8565101		<b>Úvodní sada Aura Master Introductory Kit – kompule</b> 24 0,25 g kompule (Db, DC1, DC2, DC3, DC4, DC5, DC6, DC7) 24 0,2 g kompule (E1, E2, E3) 3 0,25 g kompule (bulk-fill kompozitum) 1 aplikátor kompulí 2 VZORNÍK BAREV AURA MASTER
 8565102		<b>Sada stříkaček Starter Kit – Light</b> 3 4g stříkačka (DC1, DC2, DC4) 1 3g stříkačka (E2) 1 VZORNÍK BAREV AURA LIGHT	 8565103		<b>Sada kompule Starter Kit – Light</b> 60 0,25 g kompule (DC1, DC2, DC4) 20 0,2 g kompule (E2) 1 VZORNÍK BAREV AURA LIGHT
 8565104		<b>Sada stříkaček Starter Kit – Medium</b> 3 4g stříkačka (DC1, DC3, DC5) 1 3g stříkačka (E2) 1 VZORNÍK BAREV AURA MEDIUM	 8565105		<b>Sada kompule Starter Kit – Medium</b> 60 0,25 g kompule (DC1, DC3, DC5) 20 0,2 g kompule (E2) 1 VZORNÍK BAREV AURA MEDIUM
 8565106		<b>Sada stříkaček – Multipurpose Kit</b> 4 4g stříkačka (MC2, MC3, MC4, MC5) 1 VZORNÍK BAREV AURA MULTI CHROMA	 8565107		<b>Sada kompule – Multipurpose Kit</b> 80 0,25 g kompule (MC2, MC3, MC4, MC5) 1 VZORNÍK BAREV AURA MULTI CHROMA
	8560011 8560004 8560005 8560006 8560007 8560008 8560009 8560010 8560012 8560001 8560002 8560003 8560014 8560015 8560016 8560017	<b>Doplňkové balení Aura - stříkačky</b> 1 Db – 4 g 1 DC1 – 4 g 1 DC2 – 4 g 1 DC3 – 4 g 1 DC4 – 4 g 1 DC5 – 4 g 1 DC6 – 4 g 1 DC7 – 4 g 1 Bulk Fill – 4 g 1 E1 – 3 g 1 E2 – 3 g 1 E3 – 3 g 1 MC2 – 4 g 1 MC3 – 4 g 1 MC4 – 4 g 1 MC5 – 4 g		8565011 8565004 8565005 8565006 8565007 8565008 8565009 8565010 8565012 8565001 8565002 8565003 8565014 8565015 8565016 8565017	<b>Doplňkové balení Aura - kompule</b> 20 Db – 0,25 g 20 DC1 – 0,25 g 20 DC2 – 0,25 g 20 DC3 – 0,25 g 20 DC4 – 0,25 g 20 DC5 – 0,25 g 20 DC6 – 0,25 g 20 DC7 – 0,25 g 20 Bulk Fill – 0,25 g 20 E1 – 0,2 g 20 E2 – 0,2 g 20 E3 – 0,2 g 20 MC2 – 0,25 g 20 MC3 – 0,25 g 20 MC4 – 0,25 g 20 MC5 – 0,25 g



Your Smile. Our Vision.

Vyrobeno v Austrálii. Výrobce: SDI Limited Bayswater, Victoria 3153, Austrálie. 1 800 337 003  
www.sdi.com.au. Austria 00800 022 55734, Brazil 0800 770 1735, France 00800 022 55 734,  
Germany 0800 100 5759, Ireland 01 886 9577, Italy 800 780625, New Zealand 0800 734 034,  
Spain 00800 022 55 734, United Kingdom 00800 022 55 734, USA & Canada 1 800 228 5166

**Literatura: 1.** Chu S.J, Devigus A, Paravina R.D, Mielezsko A. J; Fundamentals of Color – Shade Matching and Communications in Esthetic Dentistry; p.89, 2nd Edn. **2.** Data on file, SDI Limited 2014.



M100177

+D036M1001771J