

ultrammat 2

HIGH SPEED AMALGAMATOR

HOCHFREQUENZ MISCHGERÄT
AMALGAMADOR DE ALTA VELOCIDADE
AMALGAMADOR DE ALTA VELOCIDAD
VIBREUR ELECTRONIQUE A GRANDE VITESSE
VIBRATORE PER AMALGAMA AD ALTA VELOCITÀ
HIGH SPEED CAPSULESCHUDDER
HØJHASTIGHEDS-KAPSELRYSTER
HØYHASTIGHETS-KAPSELRYSTER
NOPEA KAPSELISEKOITIN
ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΔΟΝΗΤΗΣ ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ
WYSOKOOBROTOWY MIESZALNIK
NAGY SEBESSÉGŰ KAPSZULARÁZÓGÉP
SUURE KIIRUSEGA AMALGAAMISEGISTI
HITRI MEŠALEC AMALGAMA
AUGSTAS FREKVENCES AMALGAMATORS
DIDELIŲ APSUKŲ AMALGAMŲ MAIŠYTUVAS
VYSOKORYCHLOSTNÍ AMALGAMÁTOR
HITRI MEŠALEC AMALGAMA
高速アマルガムミキサー
高速银汞调拌机



SDI


ultrammat 2

5 Jahre Garantie Mischgerät



- Sicherheitsstop
- Gleichmäßige und genaue Mischung
- Praktisch
- Universalmischgerät
- Hochfrequenzleistung
- Energiesparend
- 5 Jahre Garantie
- Bedienerfreundlich
- Geräuscharme Vibration
- Duale Spannung


5 Jahre Garantie

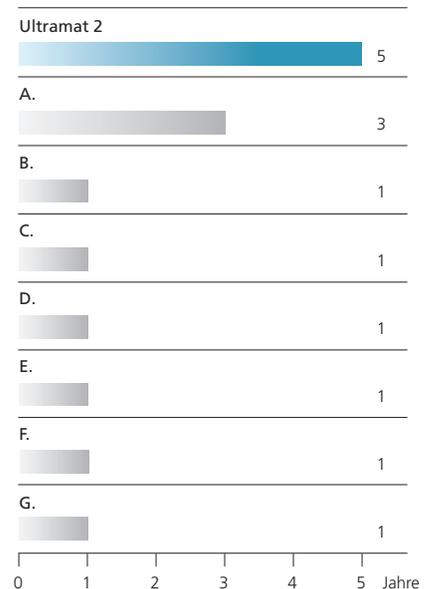

ultrammat 2 Eigenschaften:


Gleichmäßige und genaue Mischung

Der Ultramat 2 verfügt über einen Mikroprozessor gesteuerten Timer der Einstellungen zwischen 0 und 16 Sekunden ermöglicht.

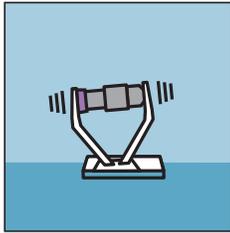

Universalmischgerät

Der Ultramat 2 ist ein Universalmischgerät für jegliche Art von Zahnfüllungsmaterialien in Kapseln.

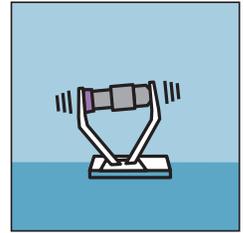


Geräuscharme Vibration

Der Ultramat 2 ist das leiseste und vibrationsärmste Mischgerät.




Sicherheitsstop

Ein integrierter Sicherheitsschalter hält den Mischvorgang automatisch an sobald der Deckel des Ultramat 2 geöffnet wird.

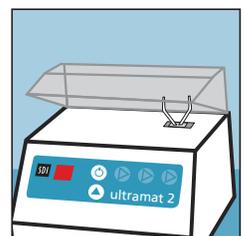


Bedienerfreundlich

Das Touch-Control-System des Ultramat 2 ist einfach und schnell zu bedienen.

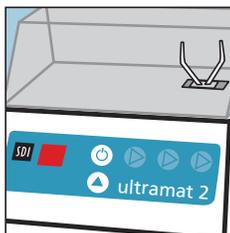


Hochfrequenzleistung

Der hochleistungsfähige Ultramat 2 weist eine Mischfrequenz von 4600 Schwingungen +/- 1% pro Minute auf.

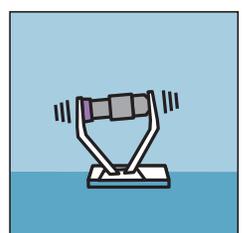


Praktisch

Die Pflege ist einfach und unkompliziert, da das Gehäuse des Ultramat 2 keinerlei Fugen und Zwischenräume aufweist. Die glatte Plastikoberfläche kann mit herkömmlichen dentalen Desinfektionsmitteln gereinigt werden.

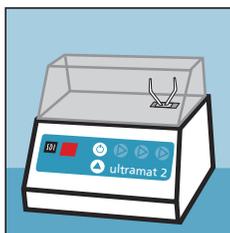

Energiesparend

Der Ultramat 2 ist wirtschaftlich und verbraucht wenig Energie.

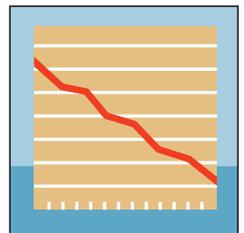


5 Jahre Garantie

Die robuste und zuverlässige Konstruktion des Ultramat 2 gewährleistet eine lange Lebensdauer und ist somit eine sichere Investition.



Duale Spannung

Der Ultramat 2 stellt sich automatisch auf verschiedene Spannungen ein und kann somit an unterschiedlichen Stromspannungsnetzen zwischen 120 und 240 Volt bzw. 50 und 60 Hz betrieben werden.

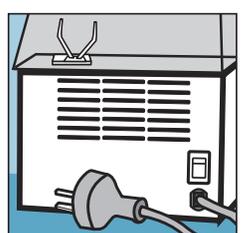

ultrammat 2



Abmessungen:

Breite	Tiefe	Höhe
217mm	173mm	180mm

Spannung:

120 / 240 volt
50 / 60 Hz

Gewicht:

2.765kg
6.095lbs

Ultramat 2

(inkl. Anschlusskabel)
Artikelnummer 5546052



Hergestellt in Australien von SDI Limited
Bayswater, Victoria 3153
Australien 1800 337 003
Österreich 00800 022 55734
Brasilien 0800 770 1735
Frankreich 00800 022 55 734
Deutschland 0800 100 5759
Irland 01 886 9577
Italien 800 780625
Neuseeland 0800 734 034
Spanien 00800 022 55 734
UK 00800 022 55 734
USA & Kanada 1 800 228 5166
www.sdi.com.au