

gs-80

ECONOMICAL, HIGH STRENGTH ADMIX AMALGAM

WIRTSCHAFTLICHES MISCHPARTIKEL AMALGAM, HOHE DRUCKFESTIGKEIT

AMÁLGAMA ADMIX ECONÔMICA E DE ALTA RESISTÊNCIA

AMALGAMA MEZCLA, ALTA RESISTENCIA, ECONOMICA

AMALGAME MIXTE SPHERES ET COPEAUX, A FORTE RESISTANCE

A LA COMPRESSION ET ECONOMIQUE



ECONOMISCH, VERSTERKT ADMIX AMALGAAM

RIMELIG OG STERKT, ADMIX AMALGAM

ΑΜΑΛΓΑΜΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ, ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

徳用強力アドミックスアマルガム

經濟型、高強度混合型銀汞合金

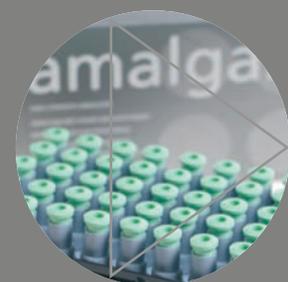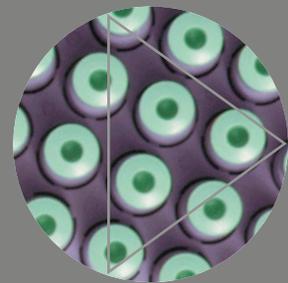

SDI

económico non-gamma 2 amalgama admix

GS-80



Amalgama mezcla, non gamma 2, tecnológicamente avanzada, a un precio razonable.

La alta resistencia y cambios dimensionales positivos de GS-80 aseguran la longevidad de la restauración y satisfacción del paciente.

Desde su creación en 1986 sobre 200 millones de restauraciones exitosas con GS-80 han sido realizadas alrededor del mundo.

Propiedades físicas


composición	Ag 40%, Sn 31.3%, Cu 28.7%, Hg 47.9%
tipo partículas de aleación	esféricas y limaduras cortadas a torno
resistencia a la compresión	225MPa (32,625psi)
resistencia a la compresión @ 24 hours	510MPa (73,950psi)
resistencia a la tensión diametral @ 1 hour	22MPa (3,190psi)
resistencia a la tensión diametral @ 24 hours	54MPa (7,830psi)
deslizamiento estático @ 7 days	0.1%
cambios dimensionales @ 24 hours	+2µm/cm

Características de manipulación óptimas

GS-80 entrega una mezcla consistente, fácil de cargar, condensable, con muy buena capacidad de pulido, alta calidad de contactos interproximales, excelente tallado. Sus características de fraguado aseguran que la restauración final cumplirá con las necesidades del operador.

Alta resistencia compresiva

La alta resistencia compresiva de GS-80 minimiza el riesgo de fractura de la restauración.⁽¹⁾ La alta resistencia compresiva asegura restauraciones de larga duración.

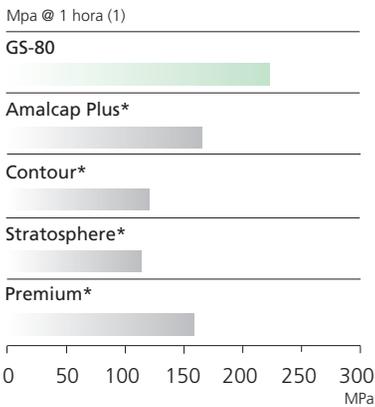


Sistema de cápsula

El sistema de cápsulas SDI está diseñado para entregar mezclas precisas y uniformes en cada preparación.




Cambios dimensionales positivos

El cambio dimensional positivo de GS-80 asegura un excelente sellado de los márgenes.⁽¹⁾ Valores negativos pueden contribuir a sensibilidad post operatoria.

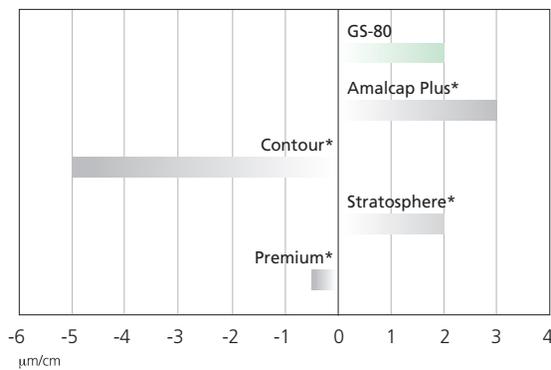

Amplia gama de tiempos de fraguado y la mayor selección de tamaños (cargas) de cápsulas.

Los tiempos de trabajo y fraguado permiten condensar y tallar grandes restauraciones sin dificultad.

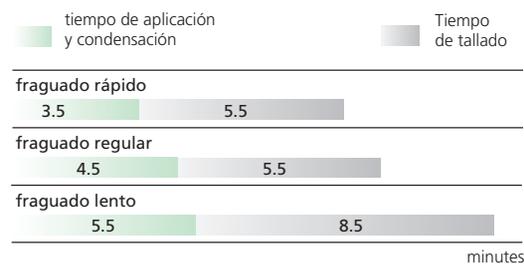

Ultramat 2

Ultramat 2 de voltaje dual, este equipo cuenta con un micro-procesador de alta precisión que controla el tiempo, entregando una trituration uniforme y exacta, asegurando óptimas características clínicas y de manejo de los materiales mezclados.



cápsulas convencionales

el color del émbolo indica el tamaño de la porción:

1 porción 2 porciones 3 porciones 5 porciones



la sección opuesta al émbolo indica la velocidad de fraguado:

rápido regular lento



NOTA: 5 porciones disponible solamente en fraguado regular.

émbolo



gs-80



Cajas de 50 cápsulas - una porción 400mg de aleación

- 4401404 fraguado lento
- 4401303 fraguado regular
- 4401202 fraguado rápido

Cajas de 50 cápsulas - dos porciones 600mg de aleación

- 4402404 fraguado lento
- 4402303 fraguado regular
- 4402202 fraguado rápido

Cajas de 50 cápsulas - tres porciones 800mg de aleación

- 4403404 fraguado lento
- 4403303 fraguado regular
- 4403202 fraguado rápido

Cajas de 50 cápsulas - cinco porciones 1200mg de aleación

- 4405000 fraguado regular

Frascos de 500 cápsulas - una porción 400mg de aleación

- 4421404 fraguado lento
- 4421303 fraguado regular
- 4421202 fraguado rápido

Frascos de 500 cápsulas - dos porciones 600mg de aleación

- 4422404 fraguado lento
- 4422303 fraguado regular
- 4422202 fraguado rápido

Frascos de 500 cápsulas - tres porciones 800mg de aleación

- 4423404 fraguado lento
- 4423303 fraguado regular
- 4423202 fraguado rápido

Frascos de 500 cápsulas - cinco porciones 1200mg de aleación

- 4425000 fraguado regular

gs-80 aleación tabletas

- 4450303 fraguado regular 5oz
- 4450505 fraguado regular 1oz
- 4440303 fraguado regular 150g
- 4440404 fraguado regular 30g

gs-80 aleación polvo

- 4460303 fraguado regular 5oz
- 4470303 fraguado regular 30g
- 4480303 fraguado regular 50g
- 4490303 fraguado regular 250g

Cápsulas GS-80 de acuerdo a ISO 24234, ANSI/ADA Especificación No.1.

*Amalcap Plus, Contour, Stratosphere y Premium no son marcas registradas de SDI Limited

(1) Fuente – Publicaciones y fichas de prueba SDI.



Made in Australia by SDI Limited

Bayswater, Victoria 3153

Australia 1 800 337 003

Austria 00800 022 55 734

Brazil 0800 770 1735

France 00800 022 55 734

Germany 0800 100 5759

Ireland 01 886 9577

Italy 800 780625

New Zealand 0800 734 034

Spain 00800 022 55 734

United Kingdom 00800 022 55 734

USA & Canada 1 800 228 5166

www.sdi.com.au



M440004 C

+D036M4400041-