

LED radiometer

LED LIGHT CURING METER

PRÜFGERÄT FÜR DIE LICHTLEISTUNG VON LED - POLYMERISATIONSLAMPEN

FOTÔMETRO PARA LUZ DE LED

MEDIDOR DE INTENSIDAD DE LAMPARAS LED

APPAREIL DE MESURE D'INTENSITE LUMINEUSE POUR LAMPE LED

RADIOMETRO PER LAMPADE FOTOPOLIMERIZZATRICI LED

LED CURING LICHT METER

LED RADIOMETER

LED-VALOKOVETTAJEN TEHOMITTARI

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΣ LED

MIERNIK NATĘŻENIA ŚWIATŁA

FÉNY INTENZÍTÁSMÉRŐ LED LÁMPÁHOZ

LED LIGHT VALGUSTUGEVUSE MÕÕDIK

MERILNIK LED LUČI

GAISMAS EMISIJAS DIOŽU LAMPAS TESTERIS


DIODINĒS (LED) LEMPOS MATUOKLIS

LED POLYMERIZAČNÍ LAMPA S REGULOVANÝM SVĚTLEM

LED POLYMERIZAČNÁ LAMPA S REGULOVANÝM SVETLOM

LED 型光重合器用ライトメーター

LED 固化光検測計

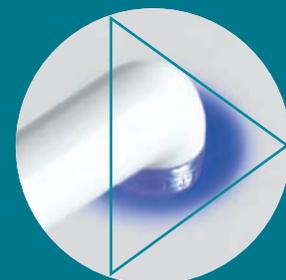

SDI

para verificar su lámpara LED

LED radiometer



Para todas las lámparas LED

El Radiómetro LED de SDI está calibrado para todas las lámparas de fotocurado LED. Está diseñado para medir la intensidad de la luz emitida en el rango de longitud de onda de 400 y 525 nanómetros, y dar lecturas de 0 a 2000mW/cm².

Lectura fácil e instantánea

El radiómetro LED de SDI se apaga automáticamente, dando una lectura digital inmediata con números largos y visibles. La lectura más alta se mantiene temporalmente para ser registrada.

Peso ligero y compacto

Pesa sólo 124grs./4.4oz, el Radiómetro LED ergonómicamente diseñado es fácil de llevar de una habitación a otra. Es suficientemente pequeño para ser colocado en cualquier bandeja dental.



Radiómetro LED
Reorden 5600028
1 x Radiómetro LED
1 x Batería de 9v (instalada)

Usted confía en su lámpara de fotocurado LED para un fotocurado rápido y de alta intensidad. La falta de fotocurado es la causa más común de fallas de los composites.

Por varias razones, las lámparas de fotocurado LED pueden perder intensidad. Es muy importante que se pruebe ocasionalmente la precisión de la salida de luz para asegurar un funcionamiento constante y adecuado, y si fuera necesario, rectificar cualquier problema de intensidad.



Made in Australia by SDI Limited
Bayswater, Victoria 3153
Australia 1 800 337 003
Austria 00800 022 55 734
Brazil 0800 770 1735
France 00800 022 55 734
Germany 0800 100 5759
Ireland 01 886 9577
Italy 800 780625
New Zealand 0800 734 034
Spain 00800 022 55 734
United Kingdom 00800 022 55 734
USA & Canada 1 800 228 5166
www.sdi.com.au

