

ultrammat 2

HIGH SPEED AMALGAMATOR

HOCHFREQUENZ MISCHGERÄT

AMALGAMADOR DE ALTA VELOCIDADE

AMALGAMADOR DE ALTA VELOCIDAD

VIBREUR ELECTRONIQUE A GRANDE VITESSE

VIBRATORE PER AMALGAMA AD ALTA VELOCITÀ

HIGH SPEED CAPSULESHUDDER

HØJHASTIGHEDS-KAPSELRYSTER

HØYHASTIGHETS-KAPSELRYSTER

NOPEA KAPSELISEKOITIN

ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΔΟΝΗΤΗΣ ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ

WYSOKOOBROTOWY MIESZALNIK

NAGY SEBESSÉGŰ KAPSZULARÁZÓGÉP

SUURE KIIRUSEGA AMALGAAMISEGISTI

HITRI MEŠALEC AMALGAMA

AUGSTAS FREKVENCES AMALGAMATORS

DIDELIŲ APSUKŲ AMALGAMŲ MAIŠYTUVAS

VYSOKORYCHLOSTNÍ AMALGAMÁTOR

HITRI MEŠALEC AMALGAMA

高速アマルガムミキサー

高速银汞调拌机



SDI


ultrammat 2

amalgamador con
5 años de garantía



- Sistema de seguridad
- Trituración exacta y consistente
- Práctica
- Mezclador multi-uso
- Alto rendimiento de energía
- Bajo consumo de energía
- Garantía de 5 años
- Simple de usar
- Silencioso y estable
- Voltaje dual


5 años de garantía

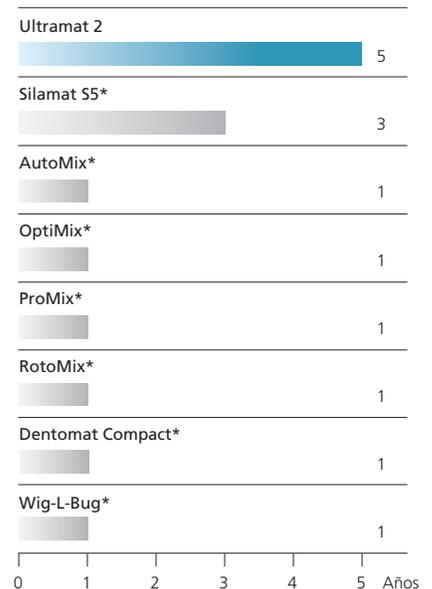

ultramat 2 características:


Trituración exacta y consistente

Ultramat 2 incluye un cronómetro (oscilador de cuarzo) de 0-16 segundos controlado por un microprocesador.

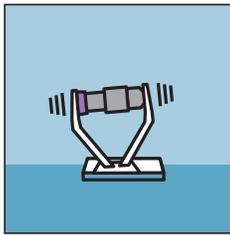

Mezclador multi-uso

Ultramat 2 es un mezclador multi-uso ideal para todo tipo de materiales dentales encapsulados.

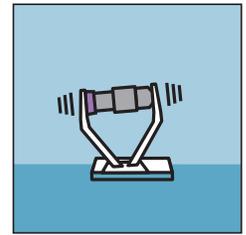


Silencioso y estable

Ultramat 2 es el más silencioso y estable de los mezcladores.




Sistema de seguridad

Un micro-switch detiene automáticamente la trituración al levantar la tapa de Ultramat 2.

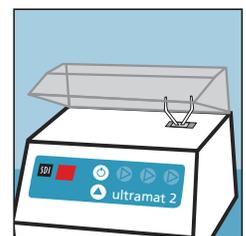


Simple de usar

El sistema de accionamiento al tacto de Ultramat 2 es rápido y simple de operar.

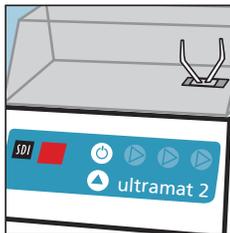


Alto rendimiento de energía

Ultramat 2 es un mezclador con alto rendimiento de energía, ya que tiene una frecuencia de 4600 oscilaciones por minuto +/- 1%.

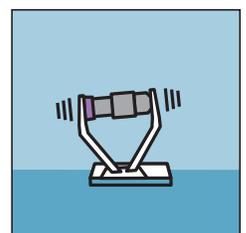


Práctico

La superficie lisa de la cubierta facilita la limpieza para el control de infecciones. La superficie plástica no porosa puede limpiarse con cualquier desinfectante dental.

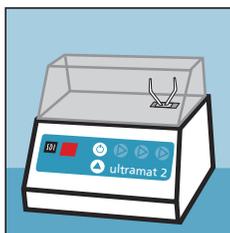

Bajo consumo de energía

Ultramat 2 tiene un bajo consumo de energía.

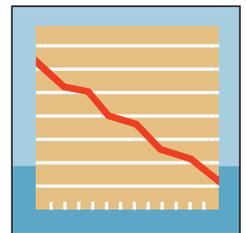


5 años de garantía

La robusta y segura construcción de Ultramat 2 garantiza que su adquisición sea una inversión de largo plazo.



Voltaje dual

Ultramat 2 opera con voltajes entre 120 y 240v, 50 y 60Hz. Es compatible con múltiples voltajes y frecuencias de energía.

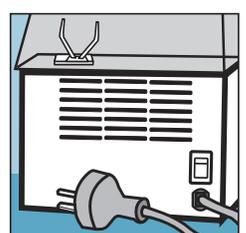

ultrammat 2



Dimensiones:

ancho	profundidad	altura
217mm	173mm	180mm
8 1/2"	6 3/4"	7 1/8"

Voltaje:

120 / 240 voltios
50 / 60 Hz

Peso:

2.765kg
6.095lbs

Ultramat 2

(USA – incluye un cable eléctrico adecuado para su uso en los Estados Unidos de América)
Código de pedido 5546045

Ultramat 2

(Para todos los países – incluye un cable eléctrico adecuado a la región a donde se envía el producto)
Código de pedido 5546052

*AutoMix, Dentomat Compact, OptiMix, ProMix, RotoMix, Silamat S5, Wig-L-Bug, no son marcas registradas de SDI Limited.



Hecho en Australia por SDI Limited
Bayswater, Victoria 3153
Australia 1 800 337 003
Austria 00800 022 55 734
Brasil 0800 770 1735
Francia 00800 022 55 734
Alemania 0800 100 5759
Irlanda 01 886 9577
Italia 800 780625
Nueva Zelanda 0800 734 034
España 00800 022 55 734
Reino Unido 00800 022 55 734
EUA & Canadá 1 800 228 5166
www.sdi.com.au

 ACN 008 075 581



DENTAL EQUIPMENT

