

# ultrammat S

HIGH SPEED AMALGAMATOR

HOCHFREQUENZ MISCHGERÄT  
AMALGAMADOR DE ALTA VELOCIDADE  
AMALGAMADOR DE ALTA VELOCIDAD  
VIBREUR ELECTRONIQUE A GRANDE VITESSE  
VIBRATORE PER AMALGAMA AD ALTA VELOCITÀ  
HIGH SPEED CAPSULESCHUDDER  
HØJHASTIGHEDS-KAPSELRYSTER  
HØYHASTIGHETS-KAPSELRYSTER  
NOPEA KAPSELISEKOITIN  
ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΔΟΝΗΤΗΣ ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ  
WYSOKOOBROTOWY MIESZALNIK  
NAGY SEBESSÉGŰ KAPSZULARÁZÓGÉP  
SUURE KIIRUSEGA AMALGAAMISEGISTI  
HITRI MEŠALEC AMALGAMA  
AUGSTAS FREKVENCES AMALGAMATORS  
DIDELIŲ APSUKŲ AMALGAMŲ MAIŠYTUVAS  
VYSOKO RÝCHLOSTNÝ AMALGAMÁTOR  
HITRI MEŠALEC AMALGAMA  
高速アマルガムミキサー  
高速銀汞調拌机



Le S est pour simple!

# ultramat S



## Vibrateur d'amalgame à grande vitesse

- Trituration homogène et précise
- Faibles vibrations et extrêmement silencieux
- Simplicité d'utilisation – 3 boutons seulement
- Convient à toutes vos capsules
- Facile à nettoyer
- Voyant basse puissance et fonction d'arrêt
- Bi-tension




# ultramat S caractéristiques:

## Si simple


### 3 boutons seulement

Il comporte 3 options de réglage du temps de trituration, 6, 8 et 10 secondes pour mélanger tous vos matériaux encapsulés. On peut arrêter l'unité à tout moment en appuyant sur ces boutons durant le fonctionnement ou simplement en soulevant le couvercle.

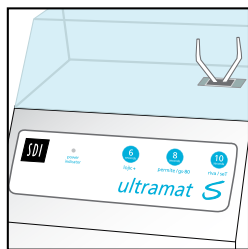

## Si facile à nettoyer!

Le capot hygiénique englobant facilite le nettoyage de contrôle des infections et la surface en plastique non poreux peut être nettoyée avec le désinfectant dentaire de votre choix.

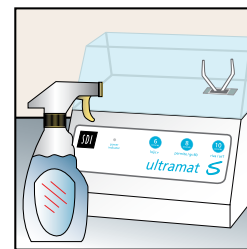


## Trituration homogène et précise

L'Ultramat S comporte une minuterie à oscillation contrôlée par microprocesseur pour une trituration homogène et précise.




## Bi-tension

L'Ultramat S fonctionne sur des tensions allant de 100 à 120 V et de 220 à 240 V, 50 et 60 Hz pour une compatibilité avec des tensions et des fréquences à puissances multiples.

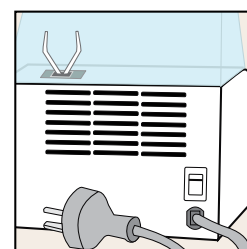


## Faibles vibrations et extrêmement silencieux

À l'encontre de certains vibreurs d'amalgame, l'émission sonore de l'Ultramat S est faible. Une vibration minimale de toutes les parties externes garantie qu'il ne bougera pas de sa position de pose.

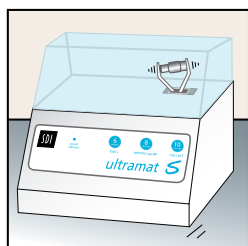


## Voyant basse puissance et fonction d'arrêt

Si la puissance devait chuter en dehors des plages permises de 100-120 V et de 220-240 V, le voyant de puissance clignotera en bleu et l'unité ne fonctionnera pas tant que la puissance correcte ne lui est pas appliquée. Ceci empêche que les matériaux soient sous-mélangés.

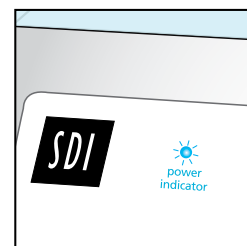


## Adapté à toutes vos capsules

Les fourches pliables peuvent s'adapter à une multitude de capsules à extrémité arrondie (capsules d'amalgames) et également à celles à canule protubérante (capsules d'amalgames de ciment d'ionomère vitreux).

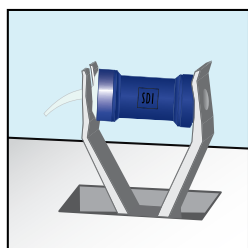


## Attribut de sécurité

L'Ultramat S s'arrêtera immédiatement de mélanger dès l'ouverture du capot transparent.

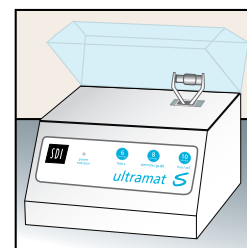

## Sortie haute énergie et entrée basse énergie

Possédant une fréquence de mélange de 4550 oscillations par minute (+/- 1%), l'Ultramat S garantit le mélange complet de tout matériau dentaire tout en consommant relativement peu d'énergie.

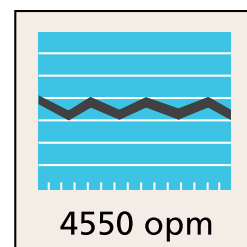

# ultramats



#### **Dimensions:**

largeur	profondeur	hauteur
217mm	173mm	180mm
8 1/2"	6 3/4"	7 1/8"

#### **Tension:**

100 à 120 volts  
220 à 240 volts  
50 à 60 Hz

#### **Poids:**

2,43 kg  
5,4 livres

#### **Ultramat S**

(Tous les pays – cordon d'alimentation inclut pour la région à laquelle le produit est livré)  
Renouvellement de commande 5546058



Fabriqué en Australie par SDI Limited  
Bayswater, Victoria 3153  
Australie 1 800 337 003  
Autriche 00800 022 55 734  
Brésil 0800 770 1735  
France 00800 022 55 734  
Allemagne 0800 100 5759  
Irlande 01 886 9577  
Italie 800 780625  
Nouvelle Zélande 0800 734 034  
Espagne 00800 022 55 734  
Royaume-Uni 00800 022 55 734  
États-Unis et Canada 1 800 228 5166  
[www.sdi.com.au](http://www.sdi.com.au)



+DO36M5546561C

M554656