

ultrammat 2

HIGH SPEED AMALGAMATOR

HOCHFREQUENZ MISCHGERÄT

AMALGAMADOR DE ALTA VELOCIDADE

AMALGAMADOR DE ALTA VELOCIDAD

VIBREUR ELECTRONIQUE A GRANDE VITESSE

VIBRATORE PER AMALGAMA AD ALTA VELOCITÀ

HOGE TOEREN CAPSULESCHUDDER

HØJHASTIGHEDS AMALGAMATOR



AMALGAMRYSTER (AMALGAMATOR) MED HØYENERGI

AVANCERAD HÖGHASTIGHETS KAPSELBLANDARE

NOPEA VAIKUTTEINEN AMALGOIJA

ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΔΟΝΗΤΗΣ ΑΜΑΑΤΑΜΑΤΟΣ

高速アマルガムミキサー

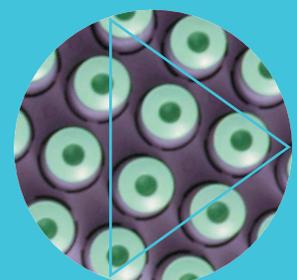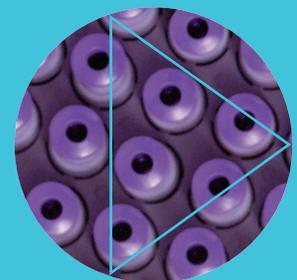

SDI

ultrammat 2



- dispositivo di sicurezza
- triturazione uniforme ed accurata
- pratico
- miscelatore multiusii
- rendimento ad alta potenza
- basso consumo energetico
- garanzia triennale
- dall'uso facile
- silenzioso a vibrazioni ridotte
- doppio voltaggio

Ultramat 2, a doppio voltaggio, con il timer ad alta precisione controllato da microprocessore, permette una triturazione uniforme ed accurata, e garantisce un trattamento e caratteristiche cliniche della miscela ottimali

Triturazione uniforme ed accurata

Ultramat 2 è munito di un timer oscillante controllato da cristallo di microprocessore tipo 0-16 secondi.



Miscelatore

Ultramat 2 multiuso è adatto per ogni tipo di materiale dentistico incapsulato.




Silenzioso a vibrazioni ridotte

Ultramat 2 è il miscelatore più silenzioso dalle vibrazioni più ridotte




Dispositivo di sicurezza

Il micro interruttore interrompe automaticamente la triturazione quando viene sollevato il coperchio.

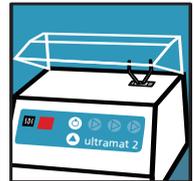

Dall'uso facile

Il quadro di comando a tatto di Ultramat 2 permette un uso veloce e facile

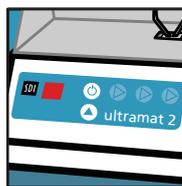


Rendimento ad alta potenza

Ultramat 2 è ad alta potenza con una frequenza di miscelazione di 4600 oscillazioni al minuto +/-1%.




Pratico

Il coperchio integrale rende più facile la pulizia contro la contaminazione mentre la superficie di plastica impermeabile può essere pulita usando qualsiasi disinfettante dentistico.

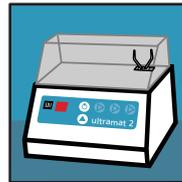

Basso consumo energetico

Ultramat 2 è a basso consumo energetico.

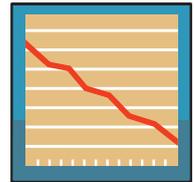


Garanzia triennale

La costruzione robusta ed affidabile di Ultramat 2 fa del vostro acquisto un investimento a lungo termine.




Voltaggio doppio



Ultramat 2 funziona con voltaggi tra 120 e 240V, 50 e 60 Hz, per compatibilità con diversi voltaggi e frequenze di alimentazione.

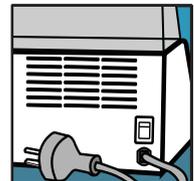

Garanzia

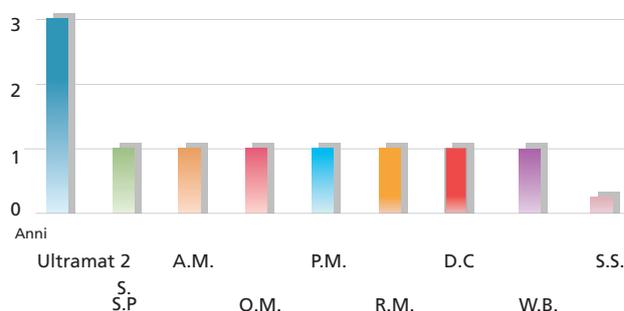

ultramat 2

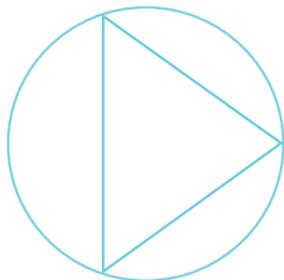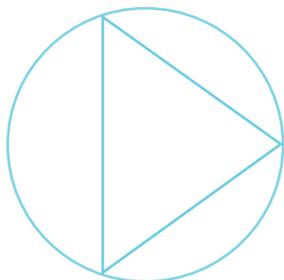

5546048	Ultramat 2	Australia / Nuova Zelanda
5546045	Ultramat 2	Nord e Sud America / Asia
5546046	Ultramat 2	Europa
5546047	Ultramat 2	Gran Bretagna



Dimensioni:

larghezza	profondità	altezza
217mm	173mm	180mm
8 1/2"	6 3/4"	7 1/8"

Voltaggio:

110 / 240 volt
50 / 60 Hz

Peso:

2.765 kg
6.095 libbre

Prodotto in Australia da
SDI Limited
Bayswater, Victoria, 3153
Australia 1 800 337 003
USA & Canada 1 800 228 5166
Brasile 0800 770 1735
Germania 0800 100 5759
Francia 00800 022 55 734
Regno Unito 00800 022 55 734
Spagna 00800 022 55 734
www.sdi.com.au



PAK 554607