

ultramat S

HIGH SPEED AMALGAMATOR

HOCHFREQUENZ MISCHGERÄT
AMALGAMADOR DE ALTA VELOCIDADE
AMALGAMADOR DE ALTA VELOCIDAD
VIBREUR ELECTRONIQUE A GRANDE VITESSE
VIBRATORE PER AMALGAMA AD ALTA VELOCITÀ
HIGH SPEED CAPSULESCHUDDER
HØJHASTIGHEDS-KAPSELRYSTER
HØYHASTIGHETS-KAPSELRYSTER
NOPEA KAPSELISEKOITIN
ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΔΟΝΗΤΗΣ ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ
WYSOKOOBROTOWY MIESZALNIK
NAGY SEBESSÉGŰ KAPSZULARÁZÓGÉP
SUURE KIIRUSEGA AMALGAAMISEGISTI
HITRI MEŠALEC AMALGAMA
AUGSTAS FREKVENCES AMALGAMATORS
DIDELIŲ APSUKŲ AMALGAMŲ MAIŠYTUVAS
VYSOKO RÝCHLOSTNÝ AMALGAMÁTOR
HITRI MEŠALEC AMALGAMA
高速アマルガムミキサー
高速银汞调拌机



S come Semplice

ultramat S



Vibratore per amalgama ad alta velocità

- Miscelazione precisa ed accurata
- Vibrazione estremamente silenziosa
- Semplice da usare: solo 3 pulsanti
- Adatto a tutte le capsule
- Facile da pulire
- Indicatore di bassa corrente e funzione di arresto
- Doppio voltaggio




ultrammat S caratteristiche:

Semplicissimo:


solo 3 pulsanti

Tre impostazioni per il tempo (6, 8 e 10 secondi) consentono di miscelare tutti i materiali in capsule. L'unità può essere arrestata in qualsiasi momento premendo questi pulsanti durante il funzionamento o semplicemente sollevando il coperchio.

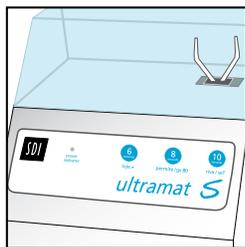

Facile da pulire!

Il rivestimento igienico monosuperficie facilita la pulizia per il controllo delle infezioni e la superficie in plastica non porosa può essere pulita con qualsiasi disinfettante di uso dentistico.

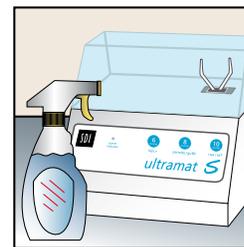


Miscelazione precisa e accurata

Il timer dell'oscillatore controllato dal microprocessore di Ultramat S garantisce una miscelazione precisa e accurata.




Doppio voltaggio

Ultramat S è compatibile con diversi voltaggi e frequenze di alimentazione: 100-120 V e 220-240 V, 50 e 60 Hz.

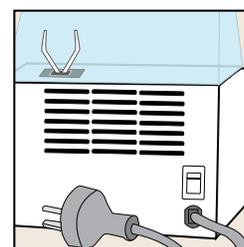


Vibrazione estremamente silenziosa

A differenza di altri vibratorii per amalgama, Ultramat S è poco rumoroso. La vibrazione ridotta di tutti i componenti esterni garantisce che non si sposti dalla propria posizione.

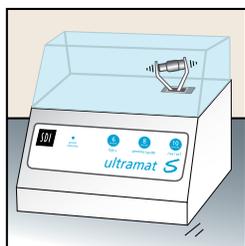


Indicatore di bassa corrente e funzione di arresto

Se l'alimentazione non rientra nei limiti indicati (100-120 V e 220-240 V), l'indicatore di corrente sarà blu e intermittente e l'apparecchio non funzionerà finché non riceverà l'alimentazione corretta. Questo consente di prevenire la miscelazione insufficiente dei materiali.

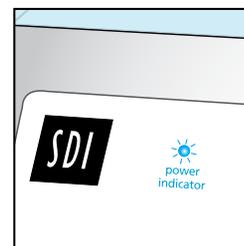


Adatto a tutte le capsule

Le forcelle pieghevoli consentono di inserire molti tipi di capsule arrotondate (capsule di amalgama) oltre a quelle con ugelli sporgenti (capsule di vetroionomero).

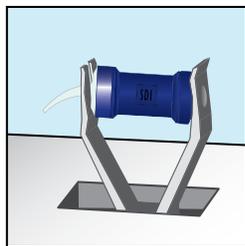



Funzione di sicurezza

Ultramat S arresta immediatamente la miscelazione quando viene aperto il coperchio trasparente.

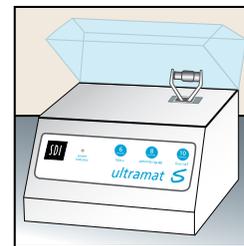

Alta potenza, basso consumo

Con una frequenza di miscelazione di 4550 oscillazioni al minuto (+/- 1%), Ultramat S garantisce la miscelazione completa di qualsiasi materiale dentale con un consumo energetico relativamente ridotto.

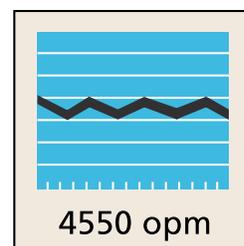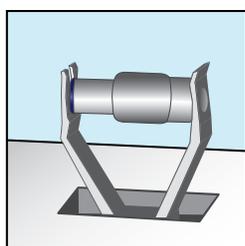

ultramat S



Dimensioni:

larghezza	profondità	altezza
217mm	173mm	180mm

Voltaggio:

100 - 120 Volt

220 - 240 Volt

50 - 60 Hz

Peso:

2,43 kg

Ultramat S

(Per tutti i paesi: include cavo di alimentazione per la regione di consegna)

Codice di riordino 5546058



Prodotto in Australia da SDI Limited
Bayswater, Victoria 3153
Australia 1 800 337 003
Austria 00800 022 55 734
Brasile 0800 770 1735
Francia 00800 022 55 734
Germania 0800 100 5759
Irlanda 01 886 9577
Italia 800 780625
Nuova Zelanda 0800 734 034
Spagna 00800 022 55 734
Regno Unito 00800 022 55 734
USA e Canada 1 800 228 5166
www.sdi.com.au



+D036M5546571D

M554657