

prosto i łąatwo, piękny **UŚMIECH**

logiczny, innowacyjny system do uzupełnień
stworzony, aby za każdym razem oszczędzać czas



SDI


Your Smile. Our Vision.

Jak skład zęba wpływa na jego kolor.

- Ponieważ kolor zęba zależy od zębiny, nie od szkliwa, odcień zębiny zasadniczo wpływa na ogólny kolor zęba.
- Szkliwo jest stosunkowo przezierne, a jego ważną cechą jest łatwa polerowalność.

Na kolor¹ zęba w 95% wpływa zębina

- Jednorodnie nieprzezroczysta
- Nasycenie barwy
- Fluorescencja

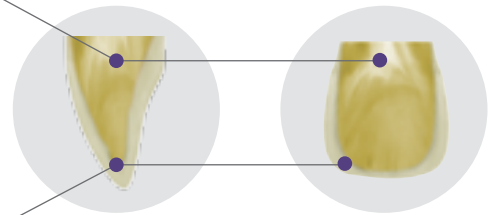

Na kolor¹ zęba w 5% wpływa szkliwo

- Przezierność
- Niskie nasycenie barwy
- Opalescencja


Aura – jak liniowa skala zapewnia łatwe podejście do doboru koloru zębów.

Produkty Aura stanowią wynik pięciu lat współpracy międzynarodowych specjalistów zajmujących się materiałami i uzupełnieniami stomatologicznymi.


- Zębina u większości pacjentów jest podobna i ma kolor czerwono-brązowo-żółty.
- Produkty Aura koncentrują się na tym, co sprawia, że kolory zębów różnią się — na nasyceniu.
- Nasycenie oznacza jak mocny lub słaby jest dany kolor. Wartość ta mierzona jest na skali procentowej.


To liniowe i naukowe zestawienie wprowadza przewidywalność i prostotę do procesu indywidualnego doboru odcienia.

RÓWNOMIERNE ROZŁOŻENIE I SZEROKA GAMA NASYCENIA KOLORÓW W PRODUKTACH AURA ZAPEWNIĄ PRZEWIDYWALNOŚĆ.

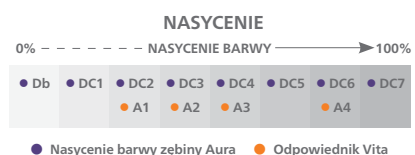

AURA TO JEDYNY PRODUKT O JEDNORODNEJ NIEPRZEZRO CZYSTOŚCI

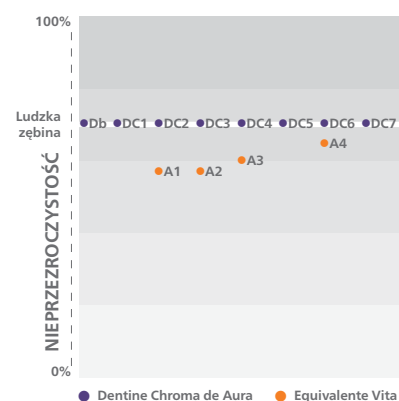

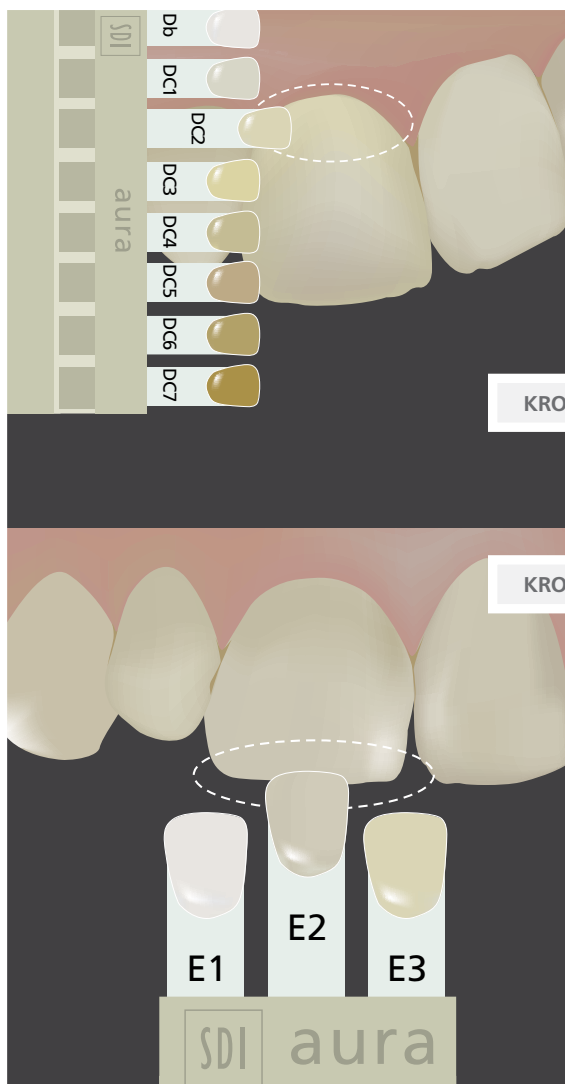

Aura – łatwe ustalenie i dopasowanie koloru zęba.

Ponieważ ogólny kolor zęba zależy od zębiny, nie od szkliwa, dobór odcienia zębiny powinien stanowić podstawowy priorytet.

KROK 1

- ▶ dopasować **odcień zębiny** w miejscu, w którym jest ona odsłonięta lub tam, gdzie szyjka zęba jest najcieńsza.

KROK 2

- ▶ dopasować **odcień szkliwa**, porównując go z krawędzią sieczną zębów sąsiednich lub zęba uzupełnianego.

Aura – proste podejście do wykończenia na wysoki połysk.

Szklivo Aura zawiera mikrowypełniacz, który zapewnia łatwą polerowalność w celu wykończenia na wysoki połysk. Jakość wykończenia na wysoki połysk nie ulega z czasem pogorszeniu.

Wybierz odcień szkliwa, obserwując pacjenta:


- E1 zęby osoby młodej lub zęby wybielone
- E2 zęby osoby dorosłej
- E3 zęby osoby starszej



Minimalna kurczliwość objętościowa w celu zapewnienia maksymalnej stabilności wymiarowej.

- Produkty Aura łączą nowe żywice o niskiej kurczliwości z nowym wypełniaczem o bardzo wysokiej gęstości (UHD).

KURCZLIWOŚĆ OBJĘTOŚCIOWA (%)²

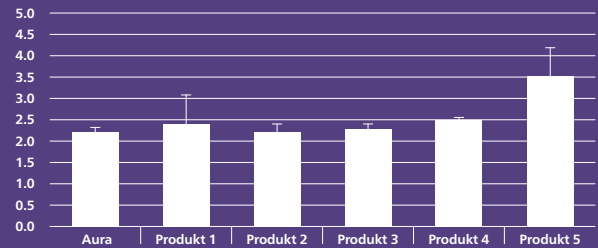

Wysokie oceny dla wysokiej wytrzymałości na zginanie produktów Aura

- Doskonała wytrzymałość na zginanie produktów Aura oznacza, że są one w stanie wytrzymać siły przenoszone w jamie ustnej.


WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE (MPa)²



Imponująca wytrzymałość na ściskanie produktów Aura

- Wyjątkowa morfologia wypełniacza UHD powoduje powstanie powierzchni o niezwykle wysokiej wytrzymałości, która może przenosić duże siły ścisające.

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE (MPa)²

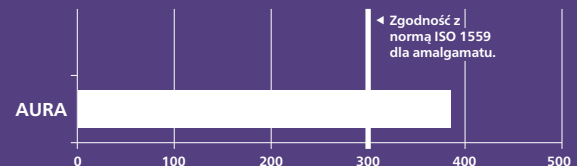

Bulk fill

- Do szybkiego wykonywania uzupełnień w odcinku tylnym, gdzie zewnętrzna warstwa szkliva nie jest konieczna.
- Produkt służący uzyskaniu wysokiego stopnia utwardzenia i wytrzymałości.










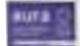
Uniwersalne zastosowanie

- Produkt dostępny także w 4 uniwersalnych odcieniach o nasyceniu barwy MC2, MC3, MC4 i MC5. Idealne rozwiązanie w przypadku wypełniania większych ubytków i zabiegów estetycznych bez zastosowania techniki warstwowej.

Aura, Australijska innowacja.

- Produkty bazujące na naturalnym wyglądzie oraz kolorach szkliwa i zębiny.
- Proste wykorzystanie techniki warstwowej w celu odtworzenia naturalnych kolorów zębów.
- Wysoka polerowalność i plastyczność.
- Uproszczony dobór odcienia dla zapracowanych lekarzy.



NUMER KATALOGOWY	ILOŚĆ	STRZYKAWKI	NUMER KATALOGOWY	ILOŚĆ	KOMPLETY
 8565100		Zestaw wstępny Aura Master — strzykawki 8 strzykawka 4 g (Db, DC1, DC2, DC3, DC4, DC5, DC6, DC7) 3 strzykawka 3 g (E1, E2, E3) 1 strzykawka 4 g (Bulk Fill) 2 KOLORNIK AURA MASTER	 8565101		Zestaw wstępny Aura Master — komplety 24 komplety 0,25 g (Db, DC1, DC2, DC3, DC4, DC5, DC6, DC7) 24 komplety 0,2 g (E1, E2, E3) 3 komplet 0,25 g (bulk fill) 1 aplikator 2 KOLORNIK AURA MASTER
 8565102		Początkowy zestaw strzykawk Aurora — mały 3 strzykawka 4 g (DC1, DC2, DC4) 1 strzykawka 3 g (E2) 1 KOLORNIK AURA LIGHT	 8565103		Początkowy zestaw kompletów Aurora — mały 60 komplety 0,25 g (DC1, DC2, DC4) 20 komplety 0,2 g (E2) 1 KOLORNIK AURA LIGHT
 8565104		Początkowy zestaw strzykawk Aurora — średni 3 strzykawka 4 g (DC1, DC3, DC5) 1 strzykawka 3 g (E2) 1 KOLORNIK AURA MEDIUM	 8565105		Początkowy zestaw kompletów Aurora — średni 60 komplety 0,25 g (DC1, DC3, DC5) 20 komplety 0,2 g (E2) 1 KOLORNIK AURA MEDIUM
 8565106		Uniwersalny zestaw strzykawk Aurora 4 strzykawka 4 g (MC2, MC3, MC4, MC5) 1 KOLORNIK AURA MULTI CHROMA	 8565107		Uniwersalny zestaw kompletów Aurora 80 komplety 0,25 g (MC2, MC3, MC4, MC5) 1 KOLORNIK AURA MULTI CHROMA
 8560011	1	Naboje do strzykawk Aurora Db – 4 g	 8565011	20	Naboje do kompletów Aurora Db – 0,25 g
8560004	1	DC1 – 4 g	8565004	20	DC1 – 0,25 g
8560005	1	DC2 – 4 g	8565005	20	DC2 – 0,25 g
8560006	1	DC3 – 4 g	8565006	20	DC3 – 0,25 g
8560007	1	DC4 – 4 g	8565007	20	DC4 – 0,25 g
8560008	1	DC5 – 4 g	8565008	20	DC5 – 0,25 g
8560009	1	DC6 – 4 g	8565009	20	DC6 – 0,25 g
8560010	1	DC7 – 4 g	8565010	20	DC7 – 0,25 g
8560012	1	Bulk Fill – 4 g	8565012	20	Bulk Fill – 0,25 g
8560001	1	E1 – 3 g	8565001	20	E1 – 0,2 g
8560002	1	E2 – 3 g	8565002	20	E2 – 0,2 g
8560003	1	E3 – 3 g	8565003	20	E3 – 0,2 g
8560014	1	MC2 – 4 g	8565014	20	MC2 – 0,25 g
8560015	1	MC3 – 4 g	8565015	20	MC3 – 0,25 g
8560016	1	MC4 – 4 g	8565016	20	MC4 – 0,25 g
8560017	1	MC5 – 4 g	8565017	20	MC5 – 0,25 g



Your Smile. Our Vision.

Wyroby Aura są z dumą produkowane w Australii przez spółkę SDI Limited Bayswater, Victoria 3153. 1 800 337 003 www.sdi.com.au. Austria 00800 022 55 734, Brazylia 0800 770 1735, Francja 00800 022 55 734, Niemcy 0800 100 5759, Irlandia 01 886 9577, Włochy 800 780625, Nowa Zelandia 0800 734 034, Hiszpania 00800 022 55 734, Wielka Brytania 00800 022 55 734, USA i Kanada 1 800 228 5166.

Literatura: 1. Chu S.J, Devigus A, Paravina R.D, Mielezko A. J; Fundamentals of Color – Shade Matching and Communications in Esthetic Dentistry; p.89, 2nd Edn. 2. Data on file, SDI Limited 2014.



M100176

+D036M10017615