

ultramat S

HIGH SPEED AMALGAMATOR

HOCHFREQUENZ MISCHGERÄT
AMALGAMADOR DE ALTA VELOCIDADE
AMALGAMADOR DE ALTA VELOCIDAD
VIBREUR ELECTRONIQUE A GRANDE VITESSE
VIBRATORE PER AMALGAMA AD ALTA VELOCITÀ
HIGH SPEED CAPSULESCHUDDER
HØJHASTIGHEDS-KAPSELRYSTER
HØYHASTIGHETS-KAPSELRYSTER
NOPEA KAPSELISEKOITIN
ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΔΟΝΗΤΗΣ ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ
WYSOKOOBROTOWY MIESZALNIK
NAGY SEBESSÉGŰ KAPSZULARÁZÓGÉP
SUURE KIIRUSEGA AMALGAAMISEGISTI
HITRI MEŠALEC AMALGAMA
AUGSTAS FREKVENCES AMALGAMATORS
DIDELIŲ APSUKŲ AMALGAMŲ MAIŠYTUVAS
VYSOKO RÝCHLOSTNÝ AMALGAMÁTOR
HITRI MEŠALEC AMALGAMA
高速アマルガムミキサー
高速銀汞調拌机



S stands for simple!

ultrammat S



Wysokoobrotowy mieszalnik


- Dokładne i szybkie mieszanie
- Cicha praca i niewielkie wibracje
- Prosty w użyciu – tylko 3 przyciski
- Odpowiedni dla wszystkich typów kapsułek
- Łatwe do czyszczenia
- Wskaźnik potwierdzający odpowiednie parametry prądu i automatyczny wyłącznik



ultramát S funkcje:


Prosty w użyciu – tylko 3 przyciski

Mieszalnik posiada 3 przyciski służące do ustawiania czasu mieszania na 6, 8 lub 10 sekund, co umożliwia sprawną pracę wszystkimi materiałami w kapsułkach. W każdej chwili można przerwać pracę urządzenia naciskając dowolny z przycisków lub podnosząc pokrywę.

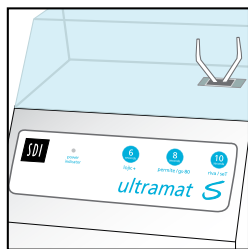

Łatwy do czyszczenia

Higieniczna powierzchnia pokrywy umożliwia dokładne czyszczenie i lepszą kontrolę infekcji, a gładkie plastikowe tworzywo, z którego wykonana jest obudowa mieszalnika, może być czyszczone wszystkimi środkami dezynfekującymi.

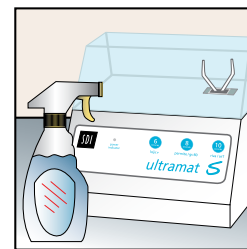


Szybkie i dokładne mieszanie

Ultramát S jest wyposażony w mikroprocesor, który kontroluje pracę urządzenia i zapewnia dokładne i szybkie mieszanie.




Przełącznik napięcia

Ultramát S działa prawidłowo przy napięciu prądu zasilającego 100-120V i 220-240V i częstotliwości 50 i 60Hz tak, by mógł być bez problemu stosowany w różnych krajach.

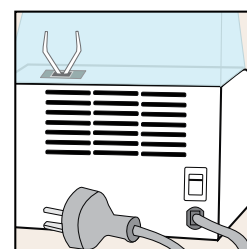


Cicha praca i niewielkie wibracje

W przeciwieństwie do innych mieszalników Ultramat S pracuje niezwykle cicho. Minimalne wibracje powodują, że urządzenie jest stabilne i nie przesuwa się podczas mieszania.

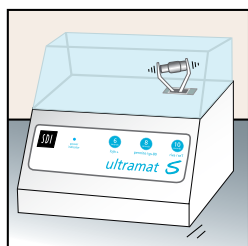


Wskaźnik potwierdzający odpowiednie parametry prądu i automatyczny wyłącznik

Jeśli parametry prądu nie będą zgodne z wymaganymi 100-200V lub 220-240V, wskaźnik będzie migać i nie będzie możliwe uruchomienie mieszalnika. Funkcja ta chroni urządzenie przed uszkodzeniem oraz nieprawidłowym mieszaniem kapsułek.

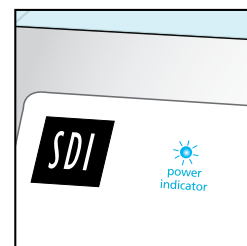


Odpowiedni dla wszystkich typów kapsułek

Elastyczne widełki pozwalają na umieszczenie w mieszalniku zwyczajnych kapsułek (amalgamaty) oraz kapsułek z końcówkami do aplikacji materiału (cementy szkło-jonomerowe).

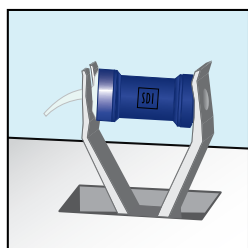



Bezpieczeństwo

Ultramát S przestanie pracować natychmiast po otwarciu przezroczystej pokrywy

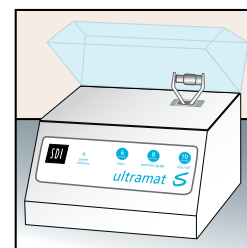

Wysoka skuteczność, mały pobór energii

Przy częstotliwości 4550 wstrząsów na minutę (+/-1%) Ultramat S zapewnia dokładne mieszanie wszystkich materiałów w kapsułkach, przy jednoczesnym niskim zużyciu energii elektrycznej.

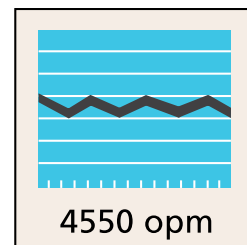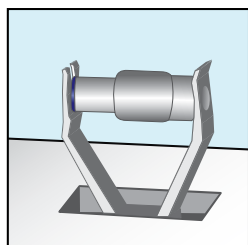

ultrammat S



Wymiary:

Szerokość	głębokość	wysokość
217mm	173mm	180mm
8 1/2"	6 3/4"	7 1/8"

Napięcie prądu:

100 - 120 Volt

220 - 240 Volt

50 - 60 Hz

Masa:

2,43 kg

5.4 lbs

Ultramat S

(Przewód zasilający odpowiedni dla kraju, w którym urządzenie zostanie sprzedane)

Kod zamówienia 5546058



Wyprodukowano w Australii przez SDI Limited

Bayswater, Victoria 3153

Australia 1 800 337 003

Austria 00800 022 55 734

Brazylia 0800 770 1735

Francja 00800 022 55 734

Niemcy 0800 100 5759

Irlandia 01 886 9577

Włochy 800 780625

Nowa Zelandia 0800 734 034

Hiszpania 00800 022 55 734

Wielka Brytania 00800 022 55 734

USA i Kanada 1 800 228 5166

www.sdi.com.au



M554659

+D036M5546591F