

# Fácil, rápido e eficaz

5mm



Preenchimento  
até 5 mm

Fotopolimerização  
20 seg.



“ Tenho vindo a utilizar o **aura bulk fill** há três anos. O compósito sai suavemente da seringa ou da cápsula, não havendo contração. O polimento é incrível e as minhas restaurações posteriores nunca foram melhores. As características são ideais para qualquer restauração, seja em dentição primária ou definitiva. Tenho recomendado este produto a vários colegas e pretendo continuar a utilizar o **aura bulk fill** como o meu principal compósito.

Dr Liel Grinbaum, DMD

SDI

Seu Sorriso. Nosso Visão.  
[www.sdi.com.au](http://www.sdi.com.au)

**aura bulk fill**  
material restaurador ultra universal

# aura bulk fill



## Uma cor. Uma camada.

Compósito simples e rápido para restaurações posteriores.

- Acabamento natural com apenas uma tonalidade universal
- Fotopolimerização profunda sem necessidade de uma camada de nivelamento
- Colocação fácil em poucos segundos
- Consistência cerosa, compacta e não colante para otimizar o manuseamento



The Dental Advisor, Vol. 33,  
No. 07, September 2016

2.21%

### Baixa contração volumétrica

O **aura bulk fill** apresenta uma contração reduzida para proporcionar restaurações duradouras.

115 MPa

### Excelente resistência à flexão

O **aura bulk fill** resiste às principais deformações sem fraturar.

375 MPa

### Forte resistência à compressão


**aura bulk fill** resiste às elevadas forças de compressão na boca.

### Profundidade de polimerização

A opacidade do **aura bulk fill** é proporcional ao seu índice de refração. Isto devido aos seus dois componentes: a matriz de resina e o conteúdo de carga.

O processo de polimerização altera ligeiramente o índice refractivo da resina para que este corresponda ao índice refractivo do conteúdo de carga.

Este processo permite a diminuição da opacidade temporária, permitindo a polimerização até ao limite mais profundo da camada de restauração.

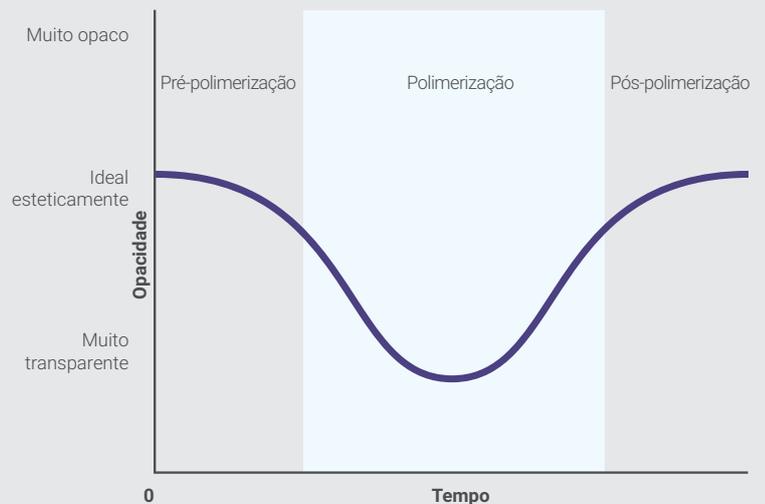

Dr. Bob Lowe (USA)



Dr. Gregor Thomas (Germany)

// 8565012 20 cápsulas x 0.25g de Bulk Fill // 8560012 1 seringa x 4g de Bulk Fill



Seu Sorriso. Nosso Visão.  
[www.sdi.com.au](http://www.sdi.com.au)

Australia 1 800 337 003  
Austria 00800 0225 5734  
Brazil 0800 770 1735  
France 00800 0225 5734  
Germany 0800 1005759  
Ireland 00800 0225 5734

Italy 00800 0225 5734  
New Zealand 0800 734 034  
Spain 00800 0225 5734  
United Kingdom 00800 0225 5734  
USA & Canada 1 800 228 5166

