

gs-80

ECONOMICAL, HIGH STRENGTH ADMIX AMALGAM

WIRTSCHAFTLICHES MISCHPARTIKEL AMALGAM, HOHE DRUCKFESTIGKEIT

AMÁLGAMA ADMIX ECONÔMICA E DE ALTA RESISTÊNCIA

AMALGAMA MEZCLA, ALTA RESISTENCIA, ECONOMICA

AMALGAME MIXTE SPHERES ET COPEAUX, A FORTE RESISTANCE

A LA COMPRESSION ET ECONOMIQUE




ECONOMISCH, VERSTERKT ADMIX AMALGAAM

RIMELIG OG STERKT, ADMIX AMALGAM

ΑΜΑΛΓΑΜΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ, ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

徳用強力アドミックスアマルガム

經濟型、高強度混合型銀汞合金

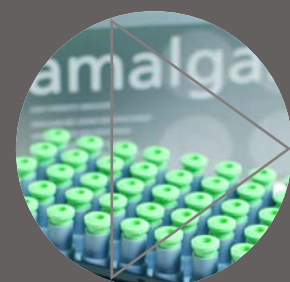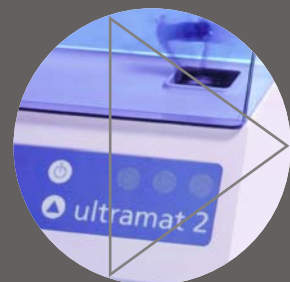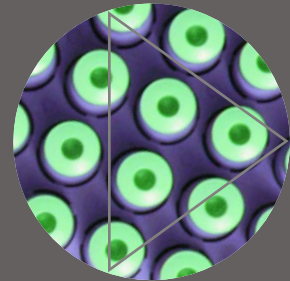

SDI

econômico sem fase gama 2 amálgama admix

GS-80



Amálgama admix, tecnicamente avançada, sem fase gama 2, a um preço acessível.

A alta resistência de GS-80 e sua discreta expansão quando aplicada, asseguram a longevidade da restauração e a satisfação do paciente.

Desde o seu lançamento, em 1986, cerca de 200 milhões de restaurações bem sucedidas foram realizadas com GS-80 em todo o mundo.

Propriedades físicas


composição	Ag 40%, Sn 31.3%, Cu 28.7%, Hg 47.9%
partículas	esferoidais irregulares
resistência à compressão @ 1h	225MPa (32,625psi)
resistência à compressão @ 24h	510MPa (73,950psi)
resistência à tração diametral @ 1h	22MPa (3,190psi)
resistência à tração diametral @ 24h	54MPa (7,830psi)
creep estática @ 7 dias	0.1%
alteração dimensional @ 24h	+2µm/cm

Excelente manuseio

A consistência da mistura de GS-80, facilidade de manipulação e de aplicação, condensabilidade, brunimento, qualidade no contato interproximal, escultura e características de presa, asseguram que o resultado final da restauração esteja de acordo com as necessidades do profissional.

Alta resistência à compressão

A alta resistência à compressão de GS-80 minimiza o risco de fratura da restauração.⁽¹⁾ Alta resistência à compressão assegura uma restauração resistente e durável.

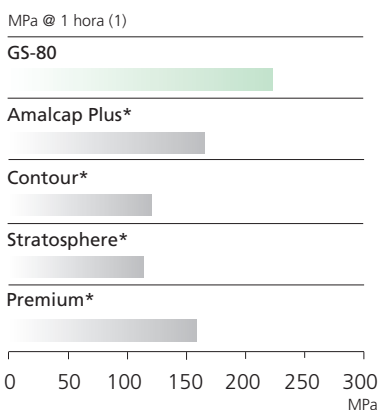


Sistema de cápsulas

O sistema de cápsulas SDI foi desenhado para apresentar misturas de excelente qualidade e consistência, em todas as triturações.




Variação dimensional positiva

A variação dimensional positiva (expansão) de GS-80 assegura um excelente selamento nas margens.⁽¹⁾ Variação negativa contribui para sensibilidade no pós-operatório.

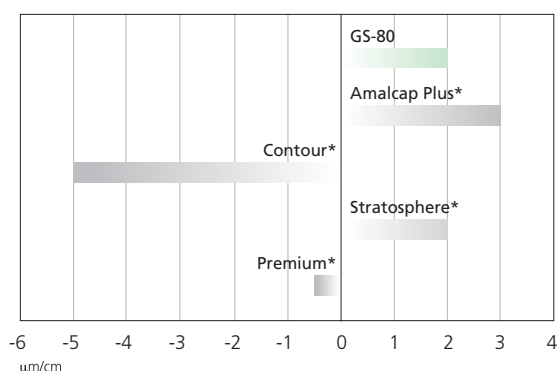

Mais opções de tempo de presa e de quantidade de porções

O tempo de trabalho e presa permite que restaurações maiores sejam condensadas e esculpidas sem dificuldade.

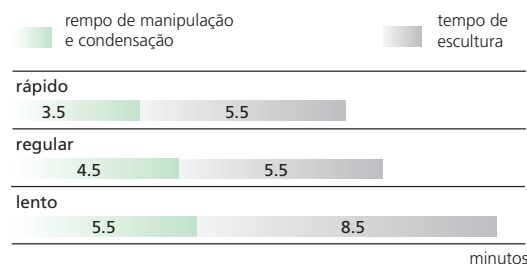


Ultramat 2

O amalgamador Ultramat 2, de dupla voltagem e com um temporizador controlado por microprocessador assegura que a trituração seja consistente e exata, o que assegura a facilidade no manuseio e as características clínicas do material misturado.



Cápsulas convencionais

A cor do êmbolo informa a quantidade de porções:

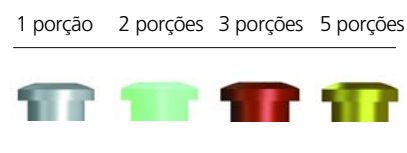

A cor da cápsula indica o tempo de cristalização:



Nota: 5 porções está disponível apenas em regular.



gs-80



As cápsulas GS-80 são certificadas com ISO 24234, ANSI/ADA Especificação nº1.

*Amalcap Plus, Contour, Stratosphere e Premium não são marcas registradas da SDI Limited.

(1) Source-Published e dados de teste da SDI.

Jarro com 500 cápsulas – 1 porção 400mg

4421404 lento
4421303 regular
4421202 rápido

Jarro com 500 cápsulas – 2 porções 600mg

4422404 lento
4422303 regular
4422202 rápido

Jarro com 500 cápsulas – 3 porções 800mg

4423404 lento
4423303 regular
4423202 rápido

Jarro com 500 cápsulas – 5 porções 1200mg

4425000 regular

gs-80 pastilhas

4450303 regular 5oz
4450505 regular 1oz
4440303 regular 150g
4440404 regular 30g

gs-80 pó

4460303 regular 5oz
4470303 regular 30g
4480303 regular 50g
4490303 regular 250g

Caixa com 50 cápsulas – 1 porção 400mg

4401404 lento
4401303 regular
4401202 rápido

Caixa com 50 cápsulas – 2 porções 600mg

4402404 lento
4402303 regular
4402202 fast set

Caixa com 50 cápsulas – 3 porções 800mg

4403404 lento
4403303 regular
4403202 fast set

Caixa com 50 cápsulas – 5 porções 1200mg

4405000 regular

SDI

Made in Australia by SDI Limited
Bayswater, Victoria 3153
Australia 1 800 337 003
Austria 00800 022 55 734
Brazil 0800 770 1735
France 00800 022 55 734
Germany 0800 100 5759
Ireland 01 886 9577
Italy 800 780625
New Zealand 0800 734 034
Spain 00800 022 55 734
United Kingdom 00800 022 55 734
USA & Canada 1 800 228 5166
www.sdi.com.au

CE
0297

