

# ultrammat S

HIGH SPEED TRITURATOR

HOCHFREQUENZ MISCHGERÄT  
MIXADOR DE CÁPSULAS DE ALTA VELOCIDADE  
AMALGAMADOR DE ALTA VELOCIDAD  
VIBREUR ELECTRONIQUE A GRANDE VITESSE  
VIBRATORE PER AMALGAMA AD ALTA VELOCITÀ  
HIGH SPEED CAPSULESCHUDDER  
HØJHASTIGHEDS-KAPSELRYSTER  
HØYHASTIGHETS-KAPSELRYSTER  
NOPEA KAPSELISEKOITIN  
ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΔΟΝΗΤΗΣ ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ  
WYSOKOOBROTOWY MIESZALNIK  
NAGY SEBESSÉGŰ KAPSZULARÁZÓGÉP  
SUURE KIIRUSEGA AMALGAAMISEGISTI  
HITRI MEŠALEC AMALGAMA  
AUGSTAS FREKVENCES AMALGAMATORS  
DIDELIŲ APSUKŲ AMALGAMŲ MAIŠYTUVAS  
VYSOKO RÝCHLOSTNÝ AMALGAMÁTOR  
HITRI MEŠALEC AMALGAMA  
高速アマルガムミキサー  
高速银汞调拌机



# ultramat S

S de simples!



## Mixador de Cápsulas


- Mistura exata e consistente
- Extremamente silencioso e com baixa vibração
- Simples de usar – apenas 3 botões
- Compatível com todas as cápsulas
- Fácil de limpar
- Identificador de baixa potência e função de desligar
- Bi-volt



# ultrammat S características:


## Muito simples, um botão para cada fase

Existem três opções de tempo, 6, 8 e 10 segundos para misturar os materiais encapsulados. A mistura pode ser interrompida ao pressionar estes botões durante a operação ou apenas ao se levantar a tampa.

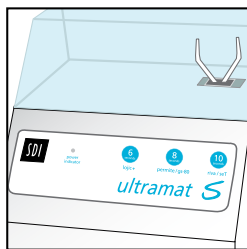

## Fácil de limpar!

A superfície lisa do aparelho é higiênica, facilitando a limpeza e o controle de infecção. Esta superfície plástica não-porosa pode ser limpa com qualquer desinfetante dental.

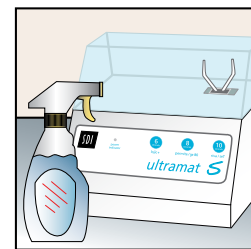


## Mistura exata e consistente

O Ultramat S tem um microprocessador interno que controla o tempo de oscilação, garantindo uma mistura mais exata e consistente.




## Bi-volt

O Ultramat S opera nas voltagens entre 100-120 e 220-240V, 50 e 60Hz – sendo compatível com várias voltagens e frequências.

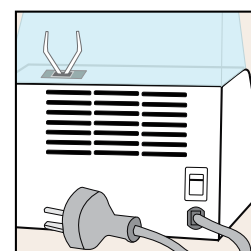


## Baixa vibração e extremamente silencioso

Diferente de outros mixadores de cápsulas, o Ultramat S tem um ruído muito baixo. Apresenta uma vibração mínima assegurando que sua parte externa não se mova fazendo com que ele permaneça estável.

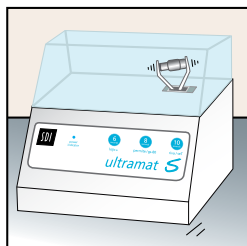


## Indicador de baixa potência e função de desligar

Caso haja uma queda de energia elétrica (a potência exigida pelo aparelho é de 100-120V e 220-240V), a luz azul que indica a potência irá piscar e o aparelho não irá funcionar até que seja fornecida a energia necessária. Isso previne que ocorra uma falha na mistura do material.

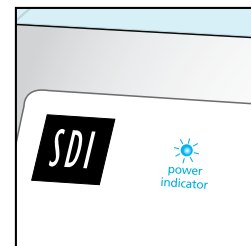


## Compatível com todas as cápsulas

Apresenta garfo flexível que se encaixa em qualquer cápsula arredondada (cápsulas de amálgama), e também nas que contém êmbolos (como as cápsulas de cimento de ionômero de vidro).

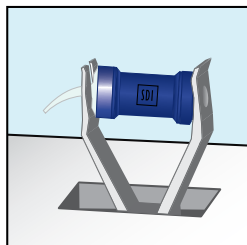



## Trava de segurança

O Ultramat S interrompe imediatamente a mistura ao levantar a tampa transparente.

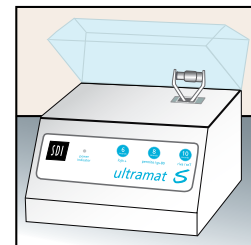

## Saída de alta energia, entrada de pouca energia

A frequência do processo de mistura é de 4550 oscilações por minuto (+/- 1%), O Ultramat S garante a completa mistura de qualquer material, consumindo pouca energia.

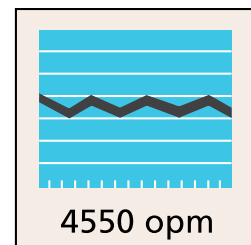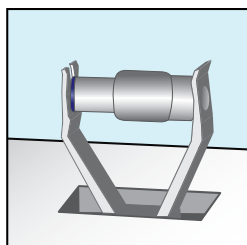

# ultramat S



#### Dimensões:

largura	profundidade	altura
217mm	173mm	180mm
8 1/2"	6 3/4"	7 1/8"

#### Voltagem:

100 - 120 volts

220 - 240 volts

50 - 60 Hz

#### Bivolt:

2.43kg

5.4lbs

#### Ultramat S

(em todos os países – inclui cabo de força para todas as regiões na qual o produto é distribuído)

Código de pedido 5546058



Fabricado na Austrália pela SDI Limited  
Bayswater, Victoria 3153  
Austrália 1 800 337 003  
Áustria 00800 022 55734  
Brasil 0800 770 1735  
França 00800 0225 5734  
Deutschland 0800 100 5759  
Irlanda 01 886 9577  
Itália 800 780625  
Nova Zelândia 0800 734 034  
Espanha 00800 022 55 734  
Reino Unido 00800 022 55 734  
EUA e Canadá 1 800 228 5166  
[www.sdi.com.au](http://www.sdi.com.au)



ACN 008 075 581



DENTAL EQUIPMENT



27-09-2017 M554655 D

+D036M5546551B